


EZ-Hold[®]

PLASTER DO MOCOWANIA PRZEWODÓW I KANIUL NOSOWYCH

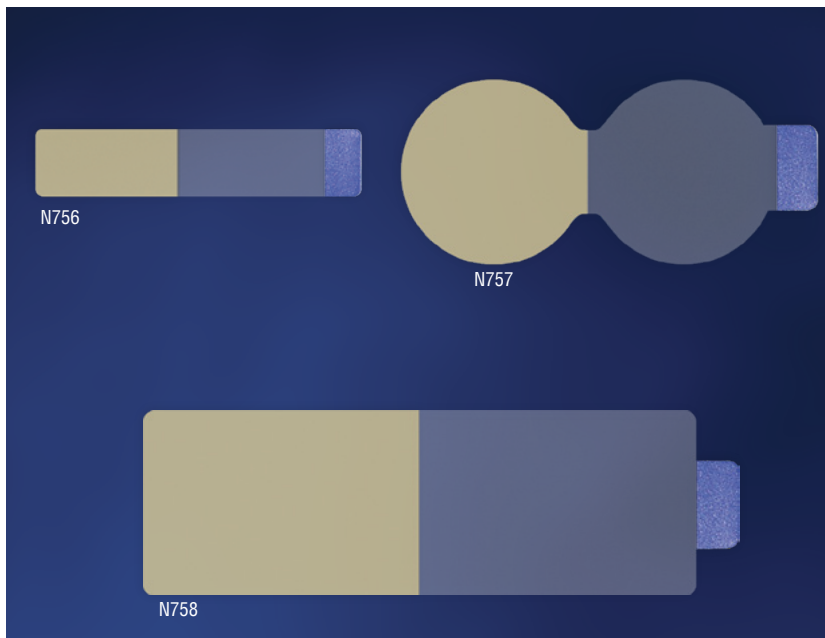

CECHY PRODUKTU

- Hydrokoloidowa warstwa NeoBond[®] nieszkodliwa dla skóry
- Zawijane skrzydełko zmniejszające napięcie przewodów
- Skrzydełko przystosowane do wielokrotnego otwierania i zamykania
- Kompaktowe wymiary i unikatowy kształt odpowiedni dla wcześniaków o niskiej masie ciała
- Produkt wykonany bez użycia kauczuku naturalnego ani zmiękczacza DEHP

Katalog	Przedmiot	Ilość/jednostka
N756	Mini	100/skrzynka
N757	Standard	100/skrzynka
N758	Bardzo Duży	100/skrzynka



U.S. Patent #D506,547

EZ-Hold®

PLASTER DO MOCOWANIA PRZEWODÓW I KANIUL NOSOWYCH

ZASTOSOWANIE

Plaster EZ-Hold służy do mocowania i podtrzymywania kaniul nosowych przy wspomaganiu oddechu.

ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

Przygotowanie

Oczyścić i wytrzeć skórę, gdzie będzie umieszczony plaster EZ-Hold, zgodnie z procedurą szpitalną.

Uwaga: Należy jak najdokładniej oczyścić i osuszyć skórę. Na wilgotnej lub owłosionej skórze plaster EZ-Hold nie zostanie prawidłowo zamocowany. Oleje i płyny kosmetyczne również utrudniają prawidłowe mocowanie produktu.

NIE WOLNO UŻYWAĆ ALKOHOLU.


Zakładanie

- 1 Przed usunięciem plastikowej osłonki aktywnie ogrzać klej hydrokoloidowy. Techniki rozgrzewania obejmują: trzymanie między dłońmi przez co najmniej 60 sekund, trzymanie w pobliżu ogrzewacza promiennikowego przez 10-15 sekund lub trzymanie przy chemicznym ogrzewaczu pięt przez 10-15 sekund.
- 2 Wyrzucić biały, papierowy podkład, a następnie odkleić i wyrzucić przezroczysty, zadrukowany podkład z bazy hydrokoloidowej.
- 3 Umieścić przylepną warstwę plastra na skórze i przytrzymać przez 60 sekund, aby umożliwić prawidłowe przymocowanie.
- 4 Odkleić i wyrzucić drugą matową warstwę i założyć skrzydełko na rurkę.

Uwaga: Podnieś skrzydełko, jeżeli konieczne jest przesunięcie lub usunięcie przewodu/ kaniuli.

Usuwanie

- 1 Wymieniaj plaster EZ-Hold na nowy co 5 dni lub częściej, zależnie od procedur szpitalnych.
- 2 Podnieś skrzydełko, aby usunąć przewód/kaniulę.
- 3 Nasącz plaster EZ-Hold wodą lub solą fizjologiczną.
- 4 Powoli oderwać EZ-Hold od skóry, jednocześnie przecierając skórę wodą lub solą fizjologiczną.

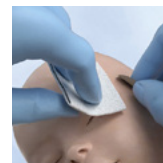

PRZESTROGI I OSTRZEŻENIAW

Przypadku wystąpienia podrażnienia skóry należy zrezygnować z używania produktu.

Na wilgotnej lub owłosionej skórze plaster EZ-Hold nie zostanie prawidłowo zamocowany. Oleje i płyny kosmetyczne również utrudniają prawidłowe mocowanie produktu.

Nie wolno czyścić skóry alkoholem przed przymocowaniem produktu.

Produkt jest przeznaczony do użytku tylko dla pojedynczego pacjenta.