


l'originale USA fatto

Little Sucker® e Tappo per Little Sucker Cover®

ASPIRATORE NASALE E PER CAVO ORALE E TAPPO PROTETTIVO PER DISPOSITIVO DI ASPIRAZIONE

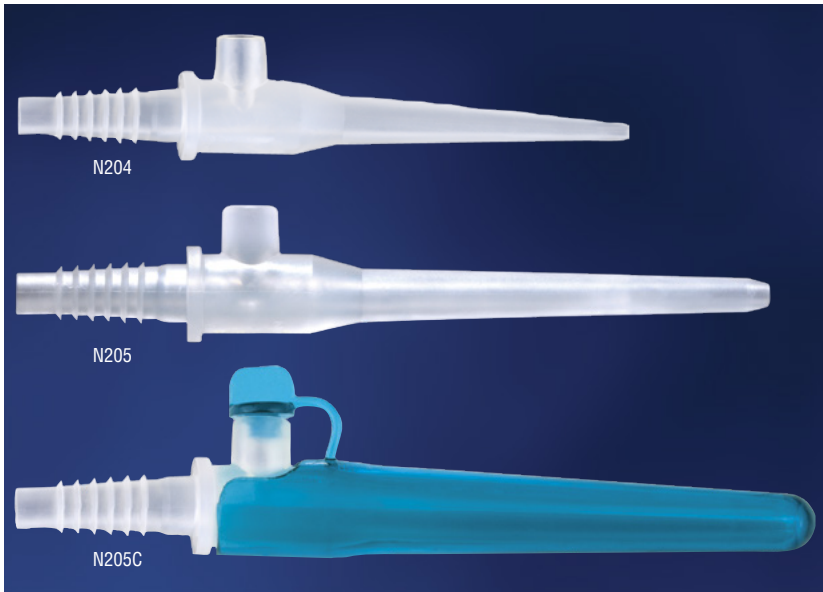

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Little Sucker

- Progettato per l'aspirazione con una mano sola
- Sfiato per aspirazione intermittente
- Punta morbida e flessibile simile a una siringa a bulbo
- Non realizzato con lattice di gomma naturale o DEHP plastificante

Tappo per Sucker Cover

- Progettato per proteggere il Little Sucker da danni, detriti e sostanze contaminanti esterne
- Colore blu vivace per una migliore visibilità
- Tappo a rumore ridotto
- Non realizzato con lattice di gomma naturale o DEHP plastificante

Catalogare	Elemento	Quantità/unità
N204	Premie	50/skrzynka
N204C	Premie con copertina	50/skrzynka
N204TP	Premie 2 pezzi*	50/skrzynka
N205	Standard	50/skrzynka
N205C	Standard con copertina	50/skrzynka
N205TP	Standard 2 pezzi*	50/skrzynka
N215	Coperchio	50/skrzynka

*Le ventose in 2 pezzi non sono compatibili con la cover

Brevetto USA
#7,635,361; #D590,056;
#6,958,050; #D474,269;
#D655,812

Little Sucker® e Tappo per Little Sucker Cover®

ASPIRATORE NASALE E PER CAVO ORALE E TAPPO PROTETTIVO PER DISPOSITIVO DI ASPIRAZIONE

INDICAZIONI PER L'USO

Little Sucker è progettata per essere utilizzata come punta per tubi di aspirazione per aspirare liquidi da bocca e narici.

Il Tappo per Little Sucker è indicato per la protezione del dispositivo di aspirazione orale e nasale Little Sucker.

ISTRUZIONI PER L'USO

- 1 Scollegare lo sfiato con il pollice e far scorrere la punta di aspirazione fuori dal tappo, qualora questo sia in posizione (si applica a N204C/N205C).
- 2 Collegare l'estremità acuminata dell'aspirazione alla linea di aspirazione.
- 3 Impostare l'aspirazione alla pressione appropriata secondo il protocollo ospedaliero o la raccomandazione del medico.
- 4 Bloccare lo sfiato con il pollice per iniziare l'aspirazione.
- 5 Procedere con un'aspirazione a intermittenza dalla bocca o dal naso. Rimuovere il pollice dallo sfiato per interrompere l'aspirazione. Bloccare nuovamente lo sfiato con il pollice per proseguire l'aspirazione.
- 6 Dopo ciascun utilizzo, aspirare l'acqua sterile attraverso la punta di aspirazione per rimuovere ogni traccia di detrito.
- 7 Laddove possibile, inserire nuovamente la punta di aspirazione nel tappo e il tappo nello sfiato della punta di aspirazione.
- 8 Sostituire ogni 24 ore la punta/coperchio dell'aspirazione o in base protocollo ospedaliero, se quest'ultimo indica di sostituirlo prima.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

La legge federale limita la vendita di questo dispositivo da parte o su prescrizione di un medico.

Solo per uso orale o nasale.

L'inserimento troppo profondo della punta di aspirazione nella bocca o nelle narici può causare traumi ai tessuti.

La punta/coperchio di aspirazione deve restare libera da detriti.

Il Tappo per Little Sucker è destinato specificamente alla protezione del dispositivo di aspirazione orale e nasale Little Sucker. È possibile che non sia adatto ad altri dispositivi di aspirazione. Non destinato all'uso con il Little Sucker a due pezzi o la Punta nasale Little Sucker.

Esclusivamente per uso monopaziente.



Manufactured by Neotech Products LLC. 28430 Witherspoon Pkwy, Valencia, CA 91355 USA

©2022 Neotech Products LLC. Product configuration is a trademark owned by and exclusively associated with Neotech.



M750 Rev A