


Das Original aus den USA

## Little Sucker<sup>®</sup> and Little Sucker-Abdeckung<sup>®</sup>

ORAL- UND NASAL-SAUGER UND SAUGER-SCHUTZABDECKUNG

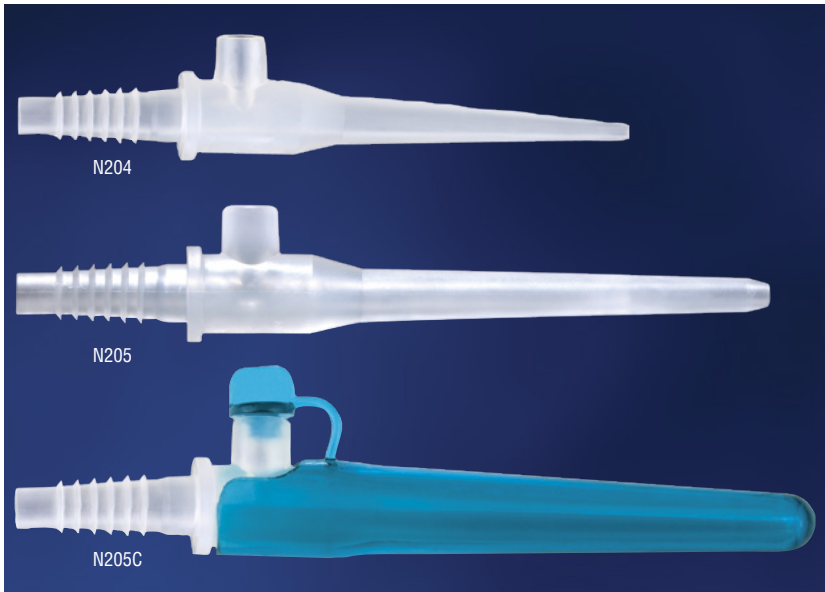

### MERKMALE & VORTEILE

#### Little Sucker

- Ausgelegt für das Saugen mit einer Hand
- Daumenöffnung erlaubt intermittierendes Saugen
- Weiche, flexible Spitze wie bei einer Ballspritze
- Ohne Naturkautschuklatex oder DEHP-Weichmacher

#### Little Sucker-Abdeckung

- Zum Schutz des Little Sucker vor Schäden, Verschmutzungen und externen Verunreinigungen
- Hellblaue Farbe ermöglicht bessere Sichtbarkeit
- Geräuschreduzierender Verschlussstopfen
- Ohne Naturkautschuklatex oder DEHP-Weichmacher

Katalog	Artikel	Mengeneinheit
N204	Frühchen	50/kasten
N204C	Frühchen mit Abdeckung	50/kasten
N204TP	Frühchen 2-tlg*	50/kasten
N205	Standard	50/kasten
N205C	Standard mit Abdeckung	50/kasten
N205TP	Standard 2-tlg*	50/kasten
N215	Abdeckung	50/kasten

\*2-teilige Little Suckers sind nicht mit dem Cover kompatibel

U.S. Patent  
 #7,635,361; #D590,056;  
 #6,958,050; #D474,269;  
 #D655,812



# Little Sucker® and Little Sucker-Abdeckung®

## ORAL- UND NASAL-SAUGER UND SAUGER-SCHUTZABDECKUNG

### GEBRAUCHSHINWEIS

Der Little Sucker ist für den Einsatz als Spitze für die Absaugung von Flüssigkeiten aus dem Mund und den Nasenlöchern bestimmt.

Die Little Sucker-Abdeckung eignet sich zum Schutz des Little Sucker-Oral und Nasal-Saugers.

### GEBRAUCHSANWEISUNG

- 1 Bei vorhandener Abdeckung (gilt für N204C/ N205C) den Daumenanschluss entfernen und die Absaugspitze aus der Abdeckung schieben.
- 2 Das mit Widerhaken versehene Ende der Absaugspitze mit der Absaugleitung verbinden..
- 3 Den richtigen Saugdruck entsprechend Krankenhausprotokoll oder Empfehlung des Arztes einstellen.
- 4 Daumen auf die Öffnung legen, um mit dem Saugen zu beginnen.
- 5 Mund und Nasenöffnungen durch intermittierendes Saugen absaugen. Zum Beenden des Saugens den Daumen von der Daumenöffnung nehmen. Daumen wieder auf die Öffnung legen, um mit dem Saugen fortzufahren.
- 6 Nach jedem Gebrauch steriles Wasser durch die Absaugspitze absaugen, um Verschmutzungen zu entfernen.
- 7 Gegebenenfalls die Absaugspitze wieder in die Abdeckung und deren Verschlussstopfen in den Daumenanschluss der Absaugspitze einsetzen.
- 8 Die Absaugspitze/-abdeckung alle 24 Stunden oder je nach üblichen Verfahren im Krankenhaus ersetzen, wobei das frühere Datum maßgebend ist.

### VORSICHTSMASSNAHMEN & WARNUNGEN

Nach Bundesgesetz darf dieses Gerät nur von einem Arzt oder auf Verordnung eines Arztes verkauft werden.

Ausschließlich zur oralen oder nasalen Anwendung bestimmt.

Die zu weite Einführung der Absaugspitze in den Mund oder in die Nasenlöcher kann zu Gewebeerletzungen führen.

Die Absaugspitze/-abdeckung sollte frei von Ablagerungen bleiben.

Die Little Sucker-Abdeckung ist speziell für die Verwendung mit dem Little Sucker-Oral oder Nasal-Sauger ausgelegt. Eventuell kann diese Halterung andere Sauger nicht aufnehmen. Sie eignet sich nicht für den 2-teiligen Little Sucker oder für Little Sucker Nasal Tip.

Nur für den Einsatz an einem Patienten gedacht.



Manufactured by Neotech Products LLC. 28430 Witherspoon Pkwy, Valencia, CA, 91355

©2022 Neotech Products LLC. Product configuration is a trademark owned by and exclusively associated with Neotech.



M751 Rev A