


Originál vyrobený v USA

Little Sucker® a Kryt Little Sucker®

ORÁLNÍ A NOSNÍ ODSÁVAČKA A OCHRANNÝ KRYT SACÍHO ZAŘÍZENÍ

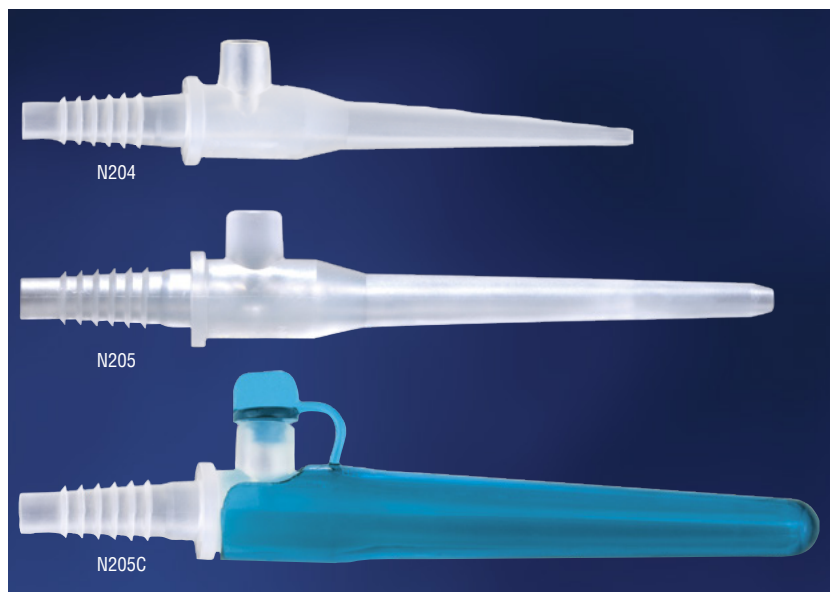

VLASTNOSTI A VÝHODY

Odsávačka Little Sucker

- Navrženo pro odsávání jednou rukou
- Otvor pro palec pro přerušované odsávání
- Měkká, pružná špička obdobná jako u stříkačky s balónkem
- Není vyrobeno z přírodního latexu ani změkčovadla DEHP

Kryt odsávačky Little Sucker

- Navržen, aby chránil odsávačku Little Sucker před poškozením, nečistotami a vnějšími kontaminujícími látkami
- Jasná modrá barva, aby byl lépe vidět
- Zátka otvoru pro snížení hluku
- Není vyrobeno z přírodního latexu ani změkčovadla DEHP

Katalog	Položka	Množství/jednota
N204	Preemie	50/krabice
N204C	Preemie s krytem	50/krabice
N204TP	Preemie 2-dílný*	50/krabice
N205	Standard	50/krabice
N205C	Standard s krytem	50/krabice
N205TP	Standard 2-dílný*	50/krabice
N215	Pokrýt	50/krabice

*2dílné přísavky nejsou kompatibilní s krytem

U.S. Patent
 #7,635,361; #D590,056;
 #6,958,050; #D474,269;
 #D655,812



Little Sucker® a Kryt Little Sucker®

ORÁLNÍ A NOSNÍ ODSÁVAČKA A OCHRANNÝ KRYT SACÍHO ZAŘÍZENÍ

INDIKACE PRO POUŽITÍ

Little Sucker je určen k použití jako hrot odsávačky pro odsávání tekutin z úst a nosních dírek.

Kryt odsávačky Little Sucker je určen k použití jako ochrana orální a nosní odsávačky Little Sucker.

NÁVOD K POUŽITÍ

- 1 Pokud je kryt na svém místě (platí pro N204C/ N205C), odzátkujte otvor na palec a vyndejte odsávačku z krytu.
- 2 Konec s výčnělkou odsávačky připojte k sacímu vedení.
- 3 Nastavte sání na příslušný tlak podle zavedených postupů nemocnice nebo podle doporučení lékaře.
- 4 Ucpěte palcem otvor a začněte odsávat.
- 5 Přerušovaným odsáváním odsajte tekutinu z úst nebo nosních dírek. Vytáhněte palec z otvoru na palec, abyste zastavili odsávání. Chcete-li v odsávání pokračovat, znovu ucpěte otvor na palec.
- 6 Po každém použití nasajte odsávačkou sterilní vodu pro odstranění nečistot.
- 7 Je-li to možné, vložte odsávačku zpět do ochranného krytu a zátku otvoru krytu do otvoru na palec odsávačky.
- 8 Odsávačku a ochranný kryt vyměňujte každých 24 hodin nebo podle zavedených postupů nemocnice podle toho, co nastane dříve.

UPOZORNĚNÍ A VAROVÁNÍ

Federální zákon (USA) omezuje prodej tohoto zařízení lékařem.

Pouze pro orální nebo nazální použití.

Pokud hrot odsávačky vložíte příliš hluboko do úst nebo nosních dírek, můžete poranit tkáň.

Hrot odsávačky a ochranný kryt by měly zůstat čisté.

Kryt Little Sucker je určen pro použití s ústním a nosním sacím zařízením Little Sucker. Pro jiná sací zařízení nemusí být vhodný. Není určen pro použití s dvoudílným zařízením Little Sucker 2-piece ani s nosním nástavcem Little Sucker Nasal Tip.

Pouze pro jednoho pacienta.



Manufactured by Neotech Products LLC. 28430 Witherspoon Pkwy, Valencia, CA, 91355 USA

©2022 Neotech Products LLC. Product configuration is a trademark owned by and exclusively associated with Neotech.



M752 Rev A