


l'originale USA fatto

Punta Nasale per Little Sucker®

DISPOSITIVO PER ASPIRAZIONE NASALE

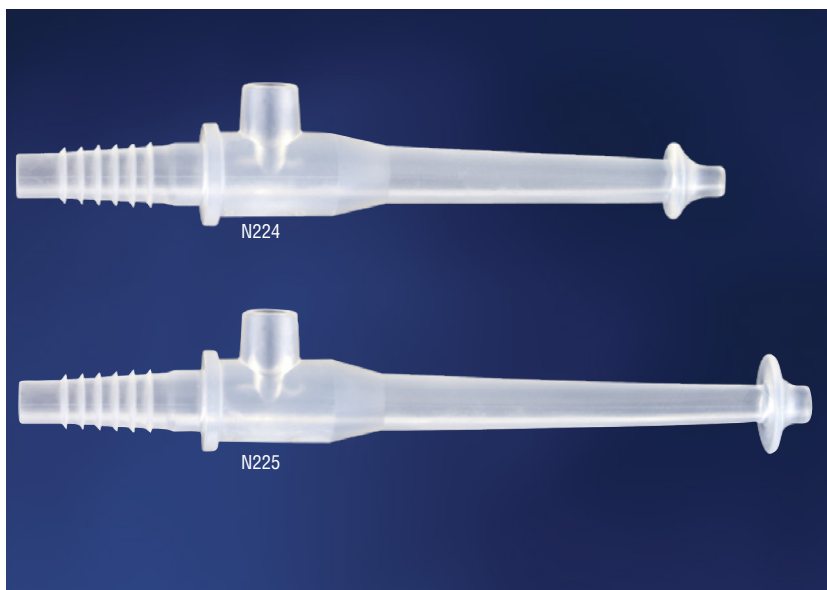

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Punta speciale progettata per ridurre al minimo potenziali traumi dei tessuti
- Progettata per l'aspirazione con una mano sola
- Sfiato per aspirazione intermittente
- Punta mobile e flessibile simile a una siringa a bulbo
- Non realizzata con lattice di gomma naturale o DEHP plastificante
- Confezionate singolarmente

Catalogare	Elemento	Quantità/unità
N224	Premie Punta Nasale	50/skrzynka
N224TP	Premie 2 pezzi	50/skrzynka
N225	Standard Punta Nasale	50/skrzynka
N225TP	Standard 2 pezzi	50/skrzynka



Brevetto USA

#7,635,361; # D668,757;

#6,958,050; #D474,269



Fabbricato
Negli USA

Punta Nasale per Little Sucker®

DISPOSITIVO PER ASPIRAZIONE NASALE

INDICAZIONI PER L'USO

La Punta Nasale Little Sucker è progettata per essere utilizzata come punta per tubi di aspirazione per aspirare liquidi dalle narici.

ISTRUZIONI PER L'USO

- 1 Collegare l'estremità acuminata dell'aspirazione alla linea di aspirazione.
- 2 Impostare l'aspirazione alla pressione appropriata secondo il protocollo ospedaliero o la raccomandazione del medico.
- 3 Bloccare lo sfiato con il pollice per iniziare l'aspirazione.
- 4 Procedere con un'aspirazione a intermittenza dalla bocca o dal naso. Rimuovere il pollice dallo sfiato per interrompere l'aspirazione. Bloccare nuovamente lo sfiato con il pollice per proseguire l'aspirazione.
- 5 Dopo ciascun utilizzo, aspirare l'acqua sterile attraverso la punta di aspirazione per rimuovere ogni traccia di detrito.
- 6 Sostituire ogni 24 ore la punta/coperchio dell'aspirazione o in base protocollo ospedaliero, se quest'ultimo indica di sostituirlo prima.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

La legge federale limita la vendita di questo dispositivo da parte o su prescrizione di un medico.

Solo per uso orale o nasale.

L'inserimento troppo profondo della punta di aspirazione nella bocca o nelle narici può causare traumi ai tessuti.

La punta/coperchio di aspirazione deve restare libera da detriti.

Il Tappo per Little Sucker è destinato specificamente alla protezione del dispositivo di aspirazione orale e nasale Little Sucker. È possibile che non sia adatto ad altri dispositivi di aspirazione. Non destinato all'uso con il Little Sucker a due pezzi o la Punta nasale Little Sucker.

Esclusivamente per uso monopaziente.



Manufactured by Neotech Products LLC. 28430 Witherspoon Pkwy, Valencia, CA 91355 USA

©2022 Neotech Products LLC. Product configuration is a trademark owned by and exclusively associated with Neotech.



M754 Rev A