


Oryginalne wyprodukowane w USA

Little Sucker[®] Nasal Tip

KOŃCÓWKA DO ODSYSANIA PŁYNÓW Z NOSA

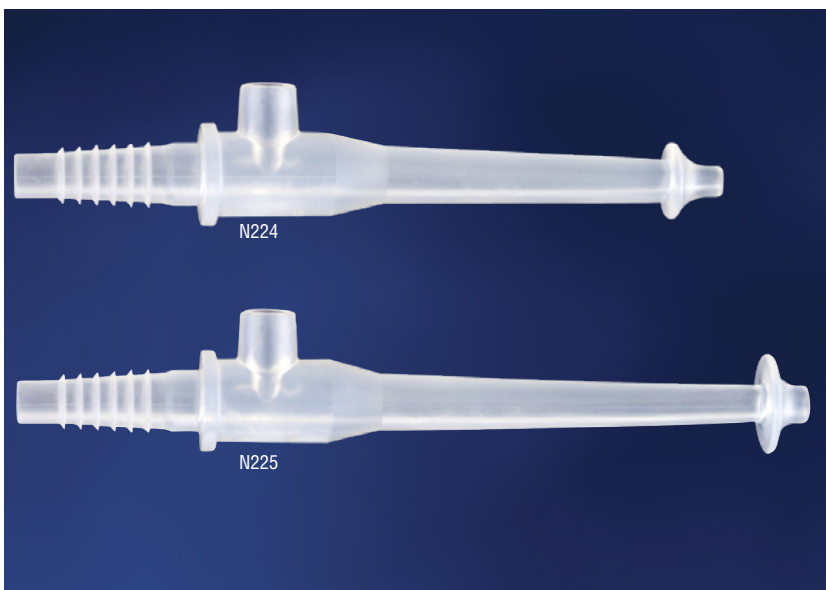

CECHY PRODUKTU

- Specjalna końcówka minimalizująca ryzyko zranienia
- Możliwa obsługa wyposażenia odsysającego jedną ręką
- Port umożliwiający aktywację funkcji odsysania kciukiem
- Miękki, elastyczny materiał podobny do używanego do produkcji gruszek medycznych
- Produkt wykonany bez użycia kauczuku naturalnego ani zmiękczacza DEHP
- Pakowanie indywidualne

Katalog	Przedmiot	Ilość/jednostka
N224	Wcześniak Kończówka nosowa	50/skrzynka
N224TP	Wcześniak 2-częściowy	50/skrzynka
N225	Standardowa końcówka nosowa	50/skrzynka
N225TP	Standardowy 2-częściowy	50/skrzynka



Patent USA

#7,635,361; # D668,757;

#6,958,050; #D474,269



Wyprodukowano
w USA

Little Sucker® Nasal Tip

KOŃCÓWKA DO ODSYSANIA PŁYNÓW Z NOSA

ZASTOSOWANIE

Little Sucker Nasal Tip jest końcówką przeznaczoną do użytku z przewodem odsysającym płyny z nosa.

ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

- 1 Podłącz przewód ssawny do karbowanego złącza końcówki ssącej.
- 2 Wyreguluj siłę ssania zgodnie z procedurami szpitalnymi lub zaleceniami lekarza.
- 3 Zamknij port kciukiem, aby uaktywnić funkcję odsysania.
- 4 Ssanie w jamie ustnej lub nozdrzach z przerywanym odsysaniem. Zdejmij kciuk z portu, aby przerwać odsysanie. Zablokuj ponownie port, aby kontynuować odsysanie.
- 5 Po każdym użyciu odsysaj wodę sterylną przy użyciu końcówki ssącej, aby pozbyć się zanieczyszczeń.
- 6 Wymieniaj końcówkę ssącą i osłonę na nową co 24 godziny lub częściej, zależnie od procedur szpitalnych.

PRZESTROGI I OSTRZEŻENIAW

Przepisy federalne zezwalają na sprzedaż tego wyrobu wyłącznie przez lekarza lub na jego zlecenie.

Produkt przeznaczony wyłącznie do stosowania w jamie ustnej i nosowej.

Umieszczenie końcówki zbyt głęboko w jamie ustnej lub nozdrzach może spowodować zranienie.

Należy chronić końcówkę ssącą i osłonę przed zanieczyszczeniem.

Osłona Little Sucker jest zaprojektowana specjalnie do użytku z końcówką Little Sucker do odsysania płynów z jamy ustnej i nosa. Może nie być odpowiednia do innych końcówek do odsysania płynów. Osłona nie jest przeznaczona do użytku z dwuczęściową końcówką Little Sucker ani końcówką Little Sucker Nasal Tip.

Produkt jest przeznaczony do użytku tylko dla pojedynczego pacjenta.



Manufactured by Neotech Products LLC. 28430 Witherspoon Pkwy, Valencia, CA 91355, USA

©2022 Neotech Products LLC. Product configuration is a trademark owned by and exclusively associated with Neotech.



M757 Rev A