


# Neotech Bridge<sup>®</sup>

## DISPOSITIF D'AIDE À L'ALLAITEMENT

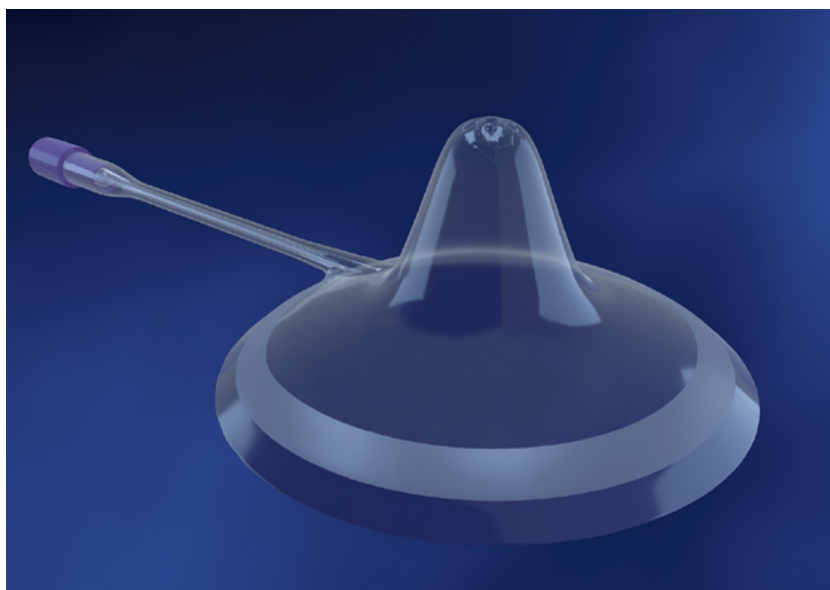

### FONCTIONS ET AVANTAGES

- Permet l'ajout de suppléments lors de l'allaitement, contribuant à stimuler la production naturelle de lait
- Prévient les interruptions de l'allaitement susceptibles d'entraîner des problèmes de mise au sein et d'approvisionnement
- Peut servir à apporter du colostrum, du lait tiré, du lait humain enrichi ou du lait maternisé quand c'est nécessaire
- La valve unidirectionnelle empêche le reflux et contribue à maximiser la production de lait naturel.
- Permet un contrôle précis du débit, du taux et du moment
- Offre au bébé une surface pour prendre le sein
- Permet de conserver le contact peau sur peau
- Silicone fin de qualité médicale pour une sensation plus naturelle
- Ne contient ni latex de caoutchouc naturel ni plastifiant DEHP

| N° De Catalogue | Article | QTÉ/UNITÉ |
|-----------------|---------|-----------|
| N8001-5         | Bridge  | 5/boîte   |
| N8001-30        | Bridge  | 30/boîte  |
| N8001-KT*       | Trousse | 1/boîte   |

\*Comprend Bridge, une extension, une seringue de 20 ml et une seringue de 60 ml

**Le N8001-KT n'est pas disponible à la vente dans tous les pays. Veuillez contacter votre distributeur Neotech pour plus d'informations.**

Brevet Américain

#12,083,07, #D967,433; #D914,892; Supplémentaire en attente

# Neotech Bridge®

## DISPOSITIF D'AIDE À L'ALLAITEMENT

### INDICATIONS D'UTILISATION

Neotech Bridge est un dispositif d'aide à l'allaitement permettant de donner un supplément de lait maternel à un nourrisson fixé au sein ou à la poitrine.

### INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- 1 Remplissez la seringue (vendue séparément pour le N8001-5 et le N8001-30) de lait ou de lait maternisé et vissez-la au connecteur violet Neotech Bridge.
- 2 Retournez le Bridge et centrez-le sur le mamelon. Rabattez le Bridge sur le sein de façon à assurer de l'herméticité.
- 3 Mettez le bébé au sein sur le Bridge.
- 4 Appuyez sur la seringue pour faire couler le lait selon les besoins.
- 5 Nettoyez après chaque utilisation et désinfectez quotidiennement, selon les instructions. Remplacez le Bridge après une semaine ou 20 lavages, selon la première éventualité.

### Nettoyage

Nettoyez immédiatement après chaque utilisation.

- 1 Démontez et rincez tous les éléments à l'eau courante, y compris le piston de la seringue, pour éliminer tout reste de lait.
- 2 Faites tremper tous les éléments démontés dans de l'eau chaude savonneuse pendant 5 minutes.
- 3 Réinsérez le piston dans la seringue et remplissez-la d'eau chaude savonneuse. Raccordez-la au Bridge et au tube d'extension (le cas échéant, non inclus pour le N8001-5 et le N8001-30). Rincez et répétez plusieurs fois.
- 4 Remplissez la seringue d'eau claire et raccordez-la à nouveau au Bridge et au tube d'extension (le cas échéant). Rincez et répétez plusieurs fois.
- 5 Remplissez la seringue d'air et raccordez-la à nouveau au Bridge et au tube d'extension (le cas échéant). Faites circuler l'air dans le tube plusieurs fois pour éliminer les gouttelettes d'eau.
- 6 Démontez tous les éléments, y compris le piston de la seringue, disposez-les sur une surface propre et sèche et laissez sécher à l'air libre. Rangez les éléments secs dans un sachet ou un contenant en plastique lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

*Précaution : Ne séchez pas les composants à l'essuie-tout ou avec un équivalent, car cela réduit la durée de vie du dispositif. Ne rangez pas d'éléments mouillés ou humides.*

### Désinfection

La désinfection doit être quotidienne. N'employez pas de stérilisateur ni de four à micro-ondes.

- 1 Démontez et rincez tous les éléments à l'eau courante, y compris le piston de la seringue, pour éliminer tout reste de lait.
- 2 Versez deux litres d'eau potable dans une casserole et portez à ébullition.
- 3 Coupez la source de chaleur et laissez refroidir pendant deux minutes et demie minimum.
- 4 Déposez les éléments démontés dans l'eau et laissez tremper 10 minutes.
- 5 Laissez l'eau refroidir dans la casserole sans couvercle et retirez délicatement les éléments avec une pince.
- 6 Disposez-les sur une surface propre et sèche et laissez sécher à l'air libre. Rangez les éléments secs dans un sachet ou un contenant en plastique lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

*Précaution : Ne séchez pas les composants à l'essuie-tout ou avec un équivalent, car cela réduit la durée de vie du dispositif. Ne rangez pas d'éléments mouillés ou humides.*

### CONTRE-INDICATIONS, AVERTISSEMENTS

#### ET MISES EN GARDE

N'utilisez pas le Bridge en cas de contre-indication médicale préexistante à l'allaitement. Dans le doute, consultez votre médecin.

Ne laissez pas le contenu du supplément sécher dans la seringue avant de la laver.

Séparez et lavez immédiatement après utilisation tous les éléments au contact de la peau, du lait maternel ou du supplément pour empêcher le reste de lait de sécher et prévenir la croissance de bactéries.

N'utilisez pour le nettoyage que de l'eau courante potable ou de l'eau en bouteille.

Ne frottez pas les composants de la seringue.

N'exposez pas cet appareil à une chaleur extrême.

N'essuyez pas les composants au papier essuie-tout ou avec un équivalent. Ne rangez pas d'éléments mouillés ou humides.

Respectez les instructions de nettoyage fournies par Neotech Products.

Certified



Corporation

Manufactured by Neotech Products LLC. 28430 Witherspoon Pkwy, Valencia, 91355

©2025 Neotech Products LLC. Product configuration is a trademark owned by and exclusively associated with Neotech. M790 Rev A 2025.02.01