


Neotech Bridge[®]

STILLHILFEGERÄT

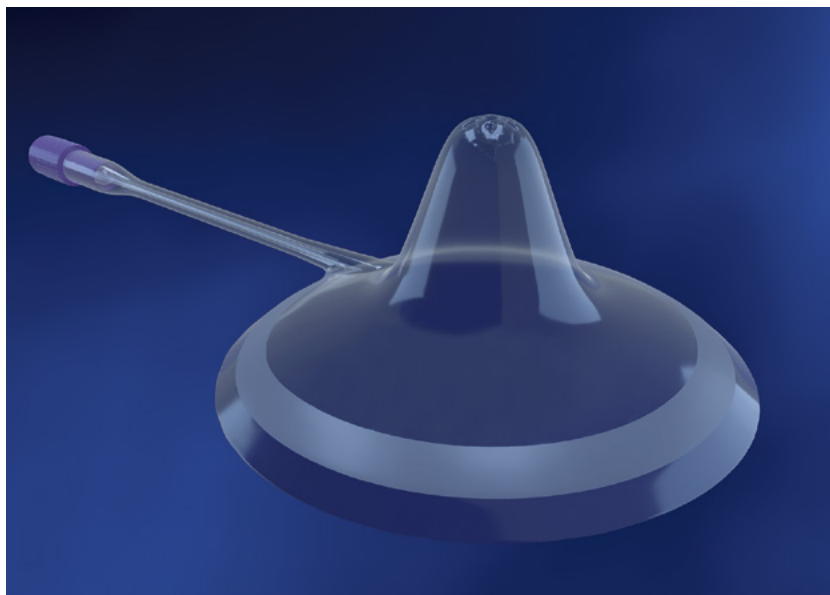

MERKMALE & VORTEILE

- Ermöglicht eine Ergänzung der Nahrung während des Stillens, was die natürliche Milchproduktion anregt
- Beugt Stillunterbrechungen vor, die zu Anlege- und Ernährungsproblemen führen können
- Kann bei Bedarf für die Zugabe von Kolostrum, abgepumpter Milch, angereicherter Muttermilch oder Säuglingsnahrung verwendet werden
- Das Einwegventil verhindert einen Rückfluss und fördert die maximale natürliche Milchproduktion
- Ermöglicht eine präzise Dosierung von Zufuhr, Menge und Zeitpunkt der Nahrungsergänzung
- Bietet eine Oberfläche für das Anlegen des Babys
- Unterstützt die Aufrechterhaltung des Haut-zu-Haut-Kontakts
- Dünnes medizinisches Silikon für eine natürlichere Haptik
- Ohne Naturkautschuklatex oder DEHP-Weichmacher hergestellt

Katalog #	Artikel	Menge/Einheit
N8001-5	Bridge	5/Kasten
N8001-30	Bridge	30/Kasten
N8001-KT*	Bausatz	1/Kasten

* Inklusive Bridge, Verlängerung, 20 ml Spritze und 60 ml Spritze

N8001-KT ist nicht in allen Ländern erhältlich. Bitte kontaktieren Sie uns Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Neotech-Händler.

US-Patent

#12,083,07, #D967,433; #D914,892; Weitere ausstehende

Neotech Bridge®

STILLHILFEGERÄT

GEBRAUCHSHINWEIS

Neotech Bridge ist ein Stillhilfegerät, das einen an der Brust angelegten Säugling mit ergänzender Nahrung versorgt.

GEBRAUCHSANWEISUNG

- 1 Füllen Sie die Spritze (separat erhältlich für N8001-5 und N8001-30) mit Milch oder Säuglingsnahrung und drehen Sie sie auf den violetten Anschluss des Neotech Bridge.
- 2 Drehen Sie das Bridge um und platzieren Sie es mittig über der Brustwarze. Drücken Sie die Ränder des Bridge nach unten auf die Brust, sodass sie dicht abschließen.
- 3 Legen Sie das Baby am Bridge an.
- 4 Drücken Sie zum Abgeben der Milch den Spritzenkolben nach Bedarf herunter.
- 5 Reinigen Sie das Bridge nach jedem Gebrauch und desinfizieren Sie es täglich, wie angegeben. Ersetzen Sie das Bridge nach einer Woche oder nach 20 Reinigungen, je nachdem, was früher eintritt.

Reinigung

Reinigen Sie das Bridge nach jedem Gebrauch sofort.

- 1 Trennen und spülen Sie alle Teile einschließlich des Spritzenkolbens unter fließendem Wasser ab, um Milchreste zu entfernen.
- 2 Weichen Sie alle Einzelteile 5 Minuten lang in warmem Spülwasser ein.
- 3 Setzen Sie den Kolben wieder in die Spritze ein und füllen Sie sie mit warmem Spülwasser. Schließen Sie sie an das Bridge und an den Verlängerungsschlauch an (falls vorhanden, bei N8001-5 und N8001-30 nicht im Lieferumfang enthalten). Spülen Sie den Schlauch und das Bridge durch und wiederholen Sie diesen Vorgang mehrere Male.
- 4 Füllen Sie die Spritze mit klarem Wasser und verbinden Sie sie wieder mit dem Bridge und dem Verlängerungsschlauch (falls dieser verwendet wurde). Spülen Sie den Schlauch und das Bridge durch und wiederholen Sie diesen Vorgang mehrere Male.
- 5 Füllen Sie die Spritze mit klarem Wasser und verbinden Sie sie wieder mit dem Bridge und dem Verlängerungsschlauch (falls dieser verwendet wurde). Drücken Sie mehrmals Luft durch den Schlauch, um Wassertropfen herauszudrücken.
- 6 Trennen Sie alle Teile einschließlich des Spritzenkolbens und legen Sie sie auf eine saubere, trockene Oberfläche und lassen Sie sie an der Luft trocknen. Bewahren Sie die trockenen Teile in einem Plastikbeutel/Behälter auf, wenn sie nicht verwendet werden.

Vorsichtsmaßnahme: Trocknen Sie die Teile nicht mit Papiertüchern oder ähnlichem ab, da sich dadurch die

Lebensdauer des Geräts verkürzt. Lagern Sie keine nassen oder feuchten Teile.

Desinfizieren

Einmal täglich desinfizieren. Verwenden Sie keine Sterilisatoren oder Mikrowellen.

- 1 Trennen und spülen Sie alle Teile einschließlich des Spritzenkolbens unter fließendem Wasser ab, um Milchreste zu entfernen.
- 2 Füllen Sie einen Topf mit 8 Tassen Trinkwasser und bringen Sie es zum Kochen.
- 3 Schalten Sie die Wärmequelle aus und lassen Sie das kochende Wasser zweieinhalb Minuten lang abkühlen.
- 4 Legen Sie die einzelnen Teile in das Wasser und lassen Sie sie 10 Minuten lang einweichen.
- 5 Lassen Sie das Wasser bei geöffnetem Topf abkühlen und nehmen Sie die Teile vorsichtig mit einer Zange aus dem Wasser.
- 6 Legen Sie die Teile auf eine saubere, trockene Oberfläche und lassen Sie sie an der Luft trocknen. Bewahren Sie die trockenen Teile in einem Plastikbeutel/Behälter auf, wenn sie nicht verwendet werden.

Vorsichtsmaßnahme: Trocknen Sie die Teile nicht mit Papiertüchern oder ähnlichem ab, da sich dadurch die Lebensdauer des Geräts verkürzt. Lagern Sie keine nassen oder feuchten Teile.

GEGENANZEIGEN,

VORSICHTSMASSNAHMEN & WARNHINWEISE

Das Bridge ist nicht bei einer bestehenden medizinischen Gegenanzeige für das Stillen zu verwenden. Fragen Sie im Zweifelsfall bitte Ihren Arzt.

Lassen Sie den Inhalt der Spritze vor dem Spülen nicht eintrocknen.

Trennen und spülen Sie alle mit der Brust, der Muttermilch oder den Nahrungsergänzungsmitteln in Berührung gekommenen Teil sofort nach dem Gebrauch, um ein Eintrocknen von Milchresten und Bakterienwachstum zu vermeiden.

Verwenden Sie zum Reinigen nur Leitungswasser oder abgefülltes Wasser in Trinkwasserqualität.

Scheuern Sie keine Bestandteile der Spritze ab.

Setzen Sie es keiner extremen Hitze aus.

Trocknen Sie die Teile nicht mit Papiertüchern oder ähnlichem ab.

Lagern Sie keine nassen oder feuchten Teile.

Befolgen Sie die von Neotech Products angegebenen Reinigungsanweisungen.

Certified



Corporation

Manufactured by Neotech Products LLC. 28430 Witherspoon Pkwy, Valencia, 91355

©2025 Neotech Products LLC. Product configuration is a trademark owned by and exclusively associated with Neotech. M791 Rev A 2025.02.01