


Neotech Bridge[®]

DISPOSITIVO DI ASSISTENZA ALL'ALLATTAMENTO

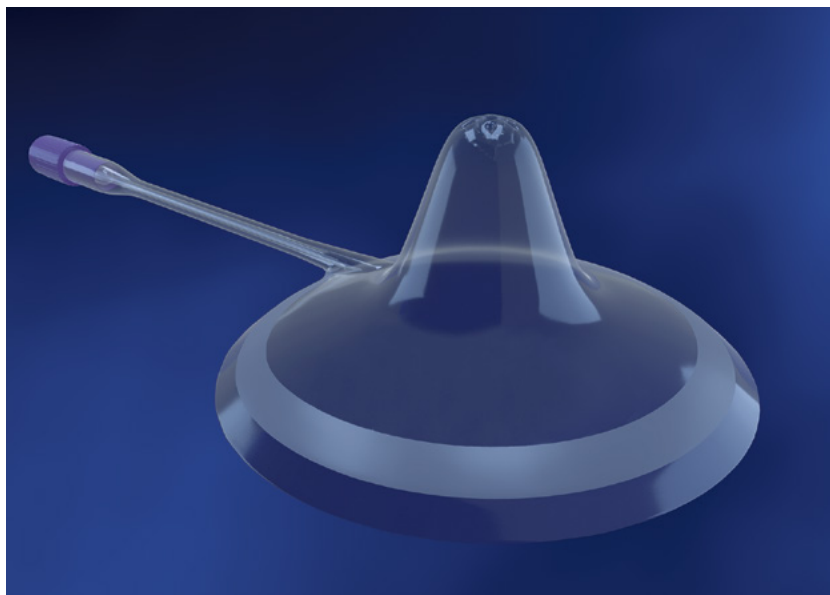

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Consente l'integrazione durante l'allattamento al seno e aiuta a stimolare la produzione naturale di latte.
- Previene le interruzioni dell'allattamento al seno che possono portare a problemi per l'attaccamento al seno e di allattamento
- Può essere usato per fornire colostro, latte espresso, latte umano fortificato o latte artificiale quando necessario
- La valvola unidirezionale impedisce il reflusso e aiuta a massimizzare la produzione naturale di latte.
- Consente un controllo preciso del flusso, della velocità e dei tempi del supplemento
- Fornisce una superficie per l'attaccamento del bambino
- Aiuta a mantenere il contatto pelle a pelle
- Sottile silicone di grado medico per una sensazione più naturale
- Non contiene lattice di gomma naturale o plastificante DEHP

Catalogo	Articolo	Quantità/Unità
N8001-5	Bridge	5/scatola
N8001-30	Bridge	30/scatola
N8001-KT*	Kit	1/scatola

* Include Bridge, estensione, siringa da 20 ml e siringa da 60 ml

N8001-KT non è disponibile per la vendita in tutti i paesi. Si prega di contattare il tuo distributore Neotech per ulteriori informazioni.

Brevetto degli Stati Uniti

#12,083,07, #D967,433; #D914,892; Ulteriori in sospeso

Neotech Bridge®

DISPOSITIVO DI ASSISTENZA ALL'ALLATTAMENTO

INDICAZIONI D'USO

Il Neotech Bridge è un dispositivo di assistenza all'allattamento progettato per fornire nutrimento supplementare a un infante attaccato al seno/petto

ISTRUZIONI D'USO

- 1 Riempi la siringa (venduta separatamente per N8001-5 e N8001-30) con latte o formula e ruotala sul connettore viola Neotech Bridge.
- 2 Rovescia il Bridge e centralo sul capezzolo. Piega Bridge sul seno per creare una chiusura.
- 3 Attacca il bambino a Bridge.
- 4 Premere la siringa per somministrare il latte secondo necessità.
- 5 Effettua la pulizia e la sterilizzazione dopo ogni utilizzo, quotidianamente, come indicato. Sostituisci Bridge dopo una settimana oppure dopo 20 lavaggi, a seconda di quale evento si verifichi prima.

Pulizia

Effettuare la pulizia immediata, dopo ogni utilizzo.

- 1 Separa e sciacqua tutte le parti, compreso lo stantuffo della siringa, sotto l'acqua corrente per eliminare i residui di latte.
- 2 Immergi tutte le parti separate in acqua calda e sapone per 5 minuti.
- 3 Reinserrire lo stantuffo nella siringa e riempire di acqua calda e sapone. Collegare a Bridge e al tubo di prolunga (se utilizzato; venduto separatamente per le serie N8001-5 e N8001-30). Sciacquare e ripetere più volte.
- 4 Riempi la siringa con acqua pulita e ricollegala a Bridge e al tubo di prolunga (se utilizzato). Sciacqua e ripeti più volte.
- 5 Riempi la siringa di aria e ricollegala a Bridge e al tubo di prolunga (se utilizzato). Fai passare più volte l'aria attraverso il tubo per rimuovere le gocce d'acqua.
- 6 Scollega tutte le parti, compreso lo stantuffo della siringa, posizionale su una superficie pulita e asciutta e lasciale asciugare all'aria. Conserva le parti asciutte in delle borse/contenitori di plastica quando non lo usi.

Precauzione: Non asciugare i componenti con carta assorbente o simili poiché questo ridurrà la durata del dispositivo. Non conservare le parti bagnate o umide.

Igienizzazione

Igienizza una volta al giorno. Non usare sterilizzatori o microonde.

- 1 Separa e sciacqua tutte le parti, incluso lo stantuffo della siringa, sotto l'acqua corrente per eliminare i residui di latte.
- 2 Riempi una pentola con 8 tazze di acqua potabile e porta ad ebollizione.
- 3 Spegnerne la fonte di calore e lasciare raffreddare l'acqua bollente per almeno due minuti e mezzo.
- 4 Immergi le parti separate nell'acqua e lasciale in ammollo per 10 minuti.
- 5 Lascia raffreddare l'acqua in una pentola senza coperchio e toglili delicatamente le parti dall'acqua con una pinza.
- 6 Posiziona le parti su una superficie pulita e asciutta e lasciale asciugare all'aria. Conserva le parti asciutte in delle borse/contenitori di plastica quando non lo usi.

Precauzione: Non asciugare i componenti con carta assorbente o simili poiché questo ridurrà la durata del dispositivo. Non conservare le parti bagnate o umide.

— CONTROINDICAZIONI, AVVERTENZE E PRECAUZIONI —

Il Bridge non deve essere utilizzato se esiste una controindicazione medica all'allattamento al seno. In caso di dubbio, chiedi al tuo medico.

Non lasciare asciugare il contenuto del supplemento nella siringa prima del lavaggio.

Separa e lava tutte le parti che entrano in contatto con il seno, il latte materno o il supplemento subito dopo l'uso per evitare che si seccino i residui di latte e per prevenire la crescita di batteri.

Per la pulizia usa solo acqua potabile dal rubinetto o quella in bottiglia.

Non strofinare i componenti della siringa.

Non esporre a fonti di calore elevato.

Non asciugare i componenti con carta assorbente o simili. Non conservare le parti bagnate o umide.

Segui le istruzioni per la pulizia fornite da Neotech Products.

Certified



Corporation

Manufactured by Neotech Products LLC. 28430 Witherspoon Pkwy, Valencia, 91355

©2025 Neotech Products LLC. Product configuration is a trademark owned by and exclusively associated with Neotech. M792 Rev A 2025.02.01