


NeoSnug

SUPOORTE DE TUBOS

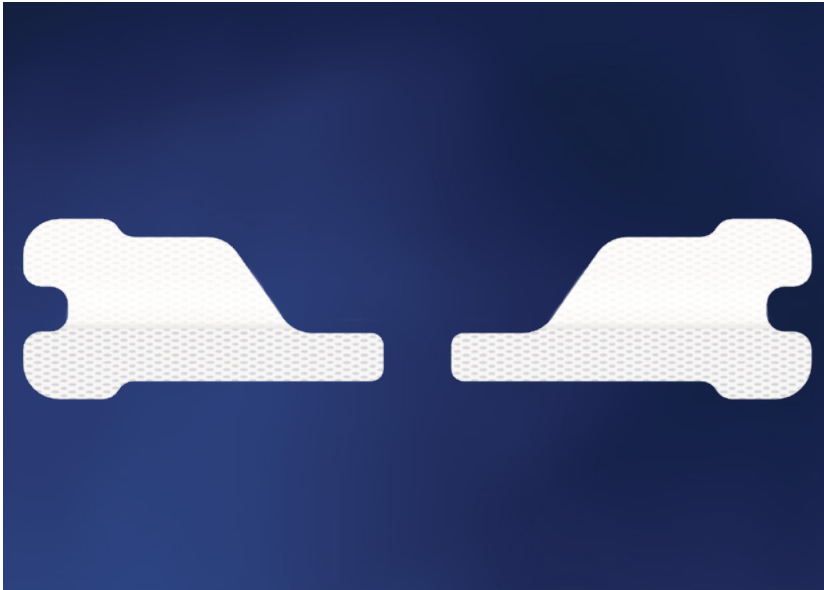

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- Base adesiva hidrocólóide NeoBond® confortável para a pele
- Aba dobrável projetada para aliviar o stress nos tubos
- A aba de retenção permanente mantém os tubos firmemente no lugar
- Formato exclusivo ideal para fixar tubos próximos às narinas
- Contornos de tecido não tecido no rosto ou no corpo
- Dois por conjunto com suportes de tubos esquerdo e direito

Número	Tamanho	Qtd/Unidade
N7015-15	Pequeno	30/caixa*

*15 conjuntos de 2 (esquerda/direita)

Patente Pendente

NeoSnug

SUORTE DE TUBOS

INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

O NeoSnug destina-se a suportar, proteger e segurar tubos gastrointestinais na pele dos pacientes.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Preparação

Limpe e seque a pele onde o NeoSnug será colocado de acordo com o protocolo hospitalar.

Nota: É importante assegurar que a pele esteja o mais limpa e seca possível. O NeoSnug não adere devidamente à pele ou cabelo húmidos. A presença de óleos e loções também afeta adversamente a aderência.

NÃO UTILIZE ÁLCOOL.

Aplicação

- 1 Antes de remover do revestimento plástico, o adesivo hidrolóide deve ser aquecido ativamente. As técnicas de aquecimento incluem: segurar entre as palmas das mãos por pelo menos 60 segundos, segurar perto de um aquecedor radiador por 10 a -15 segundos ou segurar contra um aquecedor químico pequeno por 10 a -15 segundos.
- 2 Um de cada vez, descasque o NeoSnug do revestimento transparente impresso, coloque na pele e mantenha no lugar por 60 segundos para garantir uma adequada adesão.
- 3 Dobre a aba e descasque o revestimento de papel branco identificado como "1" da base do NeoSnug. Isto irá expor a superfície adesiva.
- 4 Coloque o tubo na base.
- 5 Descasque o revestimento de papel branco identificado como "2" da aba e dobre-a sobre o tubo para a prender.

Nota: Uma vez fechada, a aba NeoSnug foi projetada para permanecer permanentemente no lugar. Não pode abrir e fechar repetidamente.

Remoção

- 1 Substitua o NeoSnug e tubo anexo a cada 5 dias ou de acordo com o protocolo hospitalar, o que ocorrer primeiro.
- 2 Com o tubo ainda preso, sature o NeoSnug com água ou soro fisiológico.
- 3 Com o tubo ainda preso, sature o NeoSnug com água ou soro fisiológico.
- 4 Remova os tubos de acordo com o protocolo hospitalar e descarte o NeoSnug e os tubos.

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

Segundo a legislação em vigor, a venda deste dispositivo está sujeita a receita ou indicação médica.

Perigo de asfíxia. O NeoSnug só deve ser usado em pacientes sob supervisão contínua e direta de profissionais de saúde.

Risco de ingestão ou aspiração.

Descontinue imediatamente a utilização em caso de irritação cutânea.

O NeoSnug não adere devidamente à pele ou cabelo húmidos. A presença de óleos e loções também afeta adversamente a aderência.

Não utilize álcool para limpar a pele, antes da aplicação.

Descartável. Não reutilizar.

Utilize apenas num único paciente.



Manufactured by Neotech Products LLC. 28430 Witherspoon Pkwy, Valencia, 91355

©2023 Neotech Products LLC. Product configuration is a trademark owned by and exclusively associated with Neotech.



M776 Rev A