


NeoBridge®

SUPOORTE DE CATETER UMBILICAL

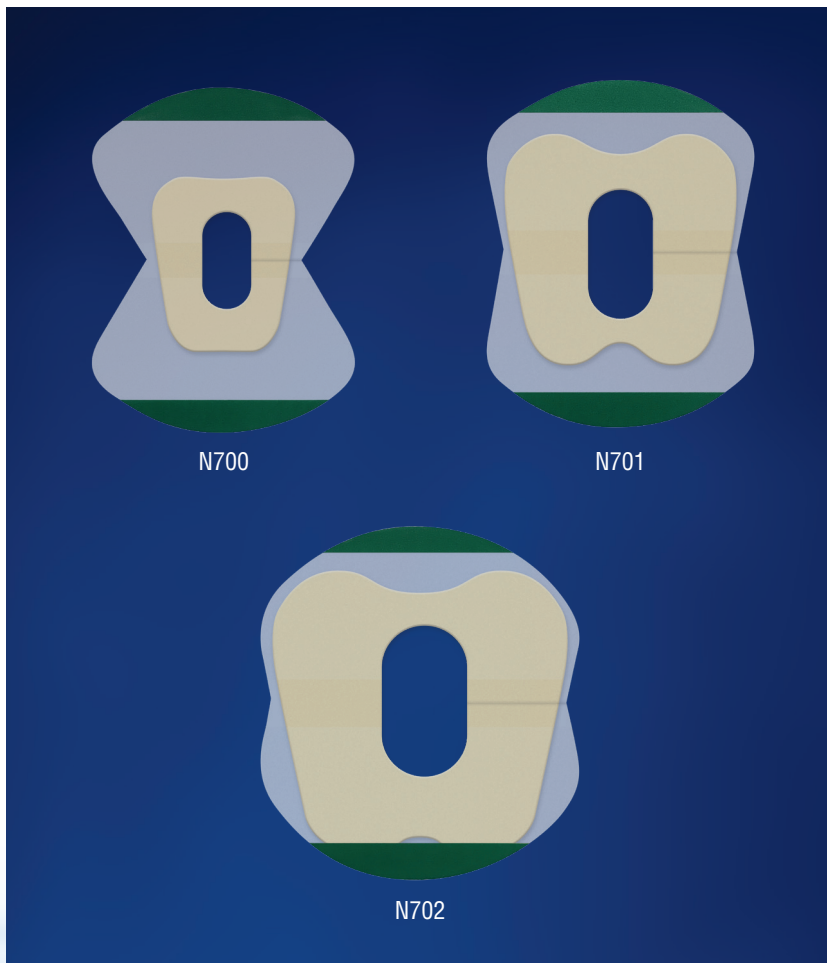

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- Base hidrocolóide NeoBond® confortável para a pele
- Abas de posicionamento seguras projetadas para aliviar a tensão nos tubos e ajudar a evitar o deslocamento
- Acomoda dois cateteres
- Aba concebida para ser aberta e fechada repetidamente
- Aba transparente para uma maior visibilidade
- Não fabricada com látex de borracha natural ou plastificante DEHP
- Embalada individualmente

Número	Tamanho	Aprox. Peso.	Qtd/Unidade
N700	Micro	800 or less	20/caixa
N701	Pequena	800-1200 gm	20/caixa
N702	Grande	1200-2200 gm	20/caixa



Patente dos EUA #5,370,627



Clínico Inventado



Feito nos Estados Unidos

NeoBridge®

SUORTE DE CATETER UMBILICAL

INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

O NeoBridge foi concebido para ancorar e suportar cateteres umbilicais. Concebido para utilização em pacientes pediátricos (recém-nascidos, bebês e crianças).

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Preparação

Depois de inserir o cateter, limpe e seque a pele de acordo com o protocolo hospitalar.

Nota: É importante assegurar que a pele esteja o mais limpa e seca possível. O NeoBridge não adere devidamente à pele ou cabelo húmidos. A presença de óleos e loções também afeta adversamente a aderência

NÃO UTILIZE ÁLCOOL.

Aplicação

- 1 Antes de remover o revestimento plástico, o adesivo hidrocolóide deve ser aquecido ativamente. As técnicas de aquecimento incluem: segurar entre as palmas das mãos por pelo menos 60 segundos, segurar perto de um aquecedor radiador por 10 a 15 segundos ou segurar contra um aquecedor químico pequeno por 10 a 15 segundos.
- 2 Deite o forro de papel branco fora, em seguida descole e descarte o revestimento plástico transparente da base hidrocolóide.
- 3 Com a abertura no lado direito e a extremidade mais larga da base hidrocolóide voltada para a cabeça do paciente, deslize o cateter pela zona central do NeoBridge.
- 4 Aplique a base sobre a pele e mantenha no sítio durante 60 segundos, para garantir a devida aderência.
- 5 Descole e descarte o revestimento fosco da metade superior da aba. Puxe a aba para cima e posicione o (s) cateter (es) na aba em forma de arco ou em U para minimizar a tensão do (s) cateter (es) que saem pela aba.

Nota: Não prolongue o (s) cateter (es) na área verde da aba. Se usar dois cateteres, faça um cateter sair por cada lado da aba.

- 6 Descole e descarte o revestimento fosco da metade superior da aba. Levante a aba para alinhar a área verde da metade inferior com a área verde da metade superior e pressioneas firmemente uma contra a outra, colocando o (s) cateter (s) entre as abas adesivas.
- 7 Puxe as abas para remover ou reposicionar o (s) cateter (es) conforme necessário, depois feche-as para o proteger.

Remoção

- 1 Substitua o NeoBridge a cada 5 dias ou de acordo com o protocolo hospitalar, o que ocorrer primeiro.
- 2 Puxe as abas para remover o (s) cateter (es).
- 3 Sature o NeoBridge com água ou soro fisiológico.
- 4 Descole lentamente o NeoBridge da pele com a ajuda de água ou soro fisiológico.

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

Segundo a legislação em vigor, a venda deste dispositivo está sujeita a receita ou indicação médica.

O NeoBridge só deve ser usado em pacientes sob supervisão contínua e direta de profissionais de saúde.

Descontinue imediatamente a utilização em caso de irritação cutânea.

O NeoBridge não adere devidamente à pele ou cabelo húmidos. A presença de óleos e loções afeta adversamente a aderência.

Não utilize álcool para limpar a pele, antes da aplicação.

Utilize apenas num único paciente.

Certified



Corporation

Manufactured by Neotech Products LLC. 28430 Witherspoon Pkwy, Valencia, 91355

©2023 Neotech Products LLC. Product configuration is a trademark owned by and exclusively associated with Neotech.



Feito nos Estados Unidos

M776 Rev A