


EZ-Hold®

TUBULAÇÃO E SUPORTE DE CÂNULA

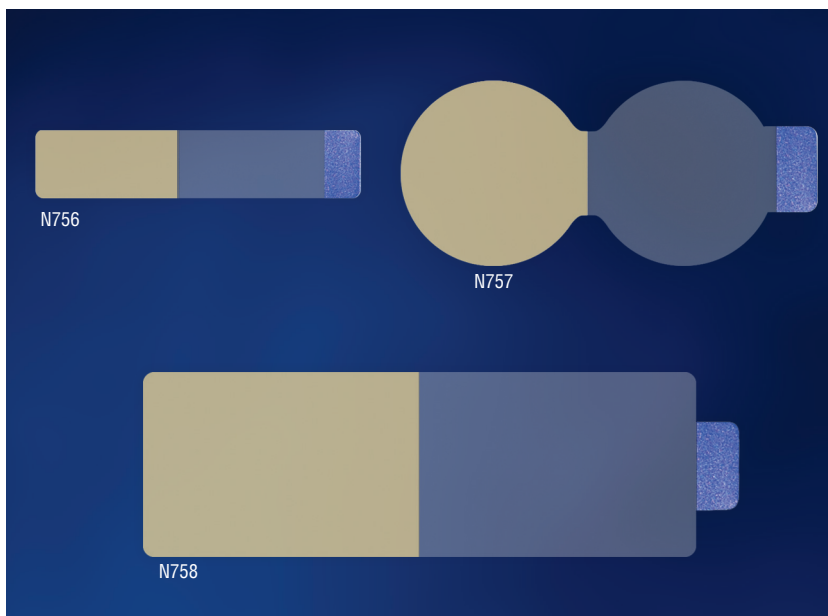

— CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS —

- Base hidrocolóide NeoBond® confortável para a pele
- Aba dobrável concebida para aliviar a pressão nos tubos
- Aba concebida para ser aberta e fechada repetidamente
- Aba transparente permite uma maior visibilidade
- Tamanho e formato reduzidos, ideais para micro prematuros
- Não fabricado com látex de borracha natural ou plastificante DEHP

Número	Tamanho	Qtd/Unid
N756	Mini	100/caixa
N757	Padrão	100/caixa
N758	Extra grande	100/caixa



Patente dos EUA #D506,547



EZ-Hold®

TUBULAÇÃO E SUPORTE DE CÂNULA

INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

O EZ-Hold foi concebido para ancorar e suportar tubos de respiração.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Preparation

Limpe e seque a pele onde o EZ-Hold será colocado de acordo com o protocolo hospitalar.

Nota: É importante assegurar que a pele esteja o mais limpa e seca possível. O EZ-Hold não adere devidamente à pele ou cabelo húmidos. A presença de óleos e loções também afeta adversamente a aderência.

NÃO UTILIZE ÁLCOOL.

Aplicação

- 1 Antes de remover os revestimentos plásticos, as alças adesivas hidrocolóides devem ser aquecidas ativamente. As técnicas de aquecimento incluem: segurar entre as palmas das mãos por pelo menos 60 segundos, segurar perto de um aquecedor radiador por 10 a -15 segundos ou segurar contra um aquecedor químico pequeno por 10 a -15 segundos.
- 2 Passo Deite o forro de papel branco fora, em seguida descole e descarte o revestimento impresso transparente da base hidrocolóide.
- 3 Passo Aplique a base na pele e mantenha assim por 60 segundos para garantir uma adesão adequada.
- 4 Descole e descarte o segundo revestimento fosco e dobre a aba sobre a tubulação.

Nota: Levante a aba conforme necessário para reposicionar ou remover a tubulação.

Remoção

- 1 Passo Substitua o EZ- a cada 5 dias ou segundo o protocolo hospitalar, o que ocorrer primeiro.
- 2 Passo Levante a aba para remover a tubulação.
- 3 Passo Saturar o EZ- com água ou soro fisiológico.
- 4 Passo Descole lentamente o EZ-Hold da pele com a ajuda de água ou soro fisiológico.



PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

Descontinue imediatamente a utilização em caso de irritação cutânea.

O EZ-Hold não adere devidamente à pele ou cabelo húmidos.

A presença de óleos e loções também afeta adversamente a aderência.

Não utilize álcool para limpar a pele, antes da aplicação.

Utilize apenas num único paciente.