


O original dos EUA feito

Little Sucker® and Little Sucker Cover®

PONTA E TAMPA DE SUCÇÃO ORAL E NASAL

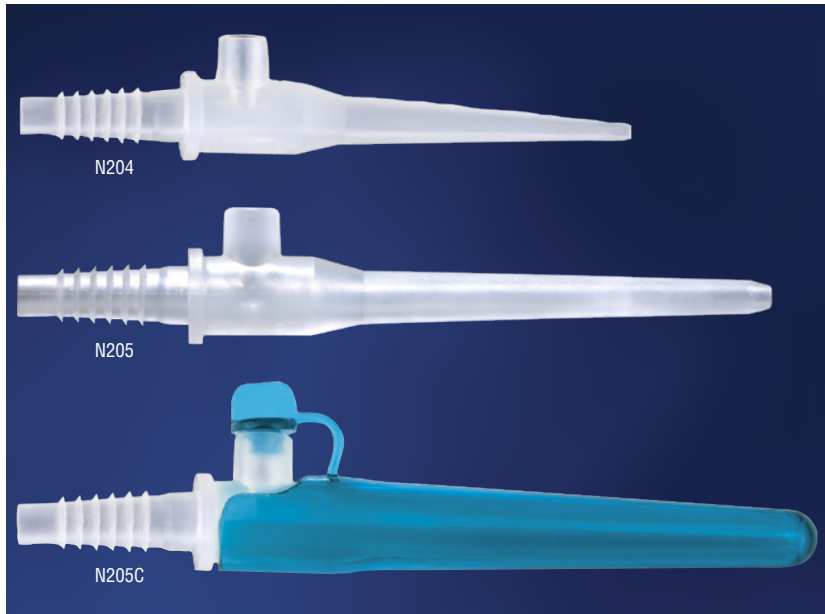

— CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS —

Little Sucker

- Concebido para sucção com uma só mão
- Entrada de polegar para sucção intermitente
- Ponta macia e flexível semelhante a um aspirador nasal
- Não fabricado com látex de borracha natural ou plastificante DEHP
- Embalado individualmente

Little Sucker Cover

- Concebido para proteger o Little Sucker contra danos, fragmentos e contaminantes externos
- Cor azul brilhante para uma maior visibilidade
- Porta com redução de ruído
- Não fabricado com látex de borracha natural ou plastificante DEHP
- Embalado individualmente

Número	Item	Qtd/Unidade
N204	Prematuro	50/caixa
N204C	Prematuro com capa	50/caixa
N204TP	Prematuro 2 partes*	50/caixa
N205	Padrão	50/caixa
N205C	Padrão com capa	50/caixa
N205TP	Padrão 2 partes*	50/caixa
N215	Capa	50/caixa

*2 partes Little Suckers não são compatíveis com a capa

Patente dos EUA
#7,635,361; #D590,056;
#6,958,050; #D474,269;
#D655,812



Little Sucker® and Little Sucker Cover®

PONTA E TAMPA DE SUCÇÃO ORAL E NASAL

INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

O Little Sucker/NeoSucker é indicado para usar como ponta do tubo de aspiração para aspirar fluidos das narinas e boca.

A tampa do Little Sucker serve para proteger o dispositivo de aspiração oral e nasal Little Sucker.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- 1 Se a tampa estiver no lugar (aplica-se ao N204C/ N205C), desconecte a porta do polegar e deslize a ponta de aspiração para fora da tampa.
- 2 Conecte a extremidade farpada da ponta de aspiração à linha de aspiração.
- 3 Defina a pressão de aspiração apropriada de acordo com o protocolo hospitalar ou recomendação médica.
- 4 Bloqueie a entrada do polegar com o polegar para começar a aspirar.
- 5 Aspirar narinas e boca com aspiração intermitente. Remova o polegar da porta do polegar para interromper a aspiração. Bloqueie a entrada do polegar novamente para continuar a aspiração.
- 6 aspire água estéril através da ponta de aspiração após cada utilização para limpar os detritos.
- 7 Se aplicável, reinsira a ponta de aspiração na tampa e insira o tampão da entrada da ponta na porta da ponta de aspiração.
- 8 Substitua a ponta/tampa de aspiração a cada 24 horas ou de acordo com o protocolo hospitalar, o que ocorrer primeiro.

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

Segundo a legislação em vigor, a venda deste dispositivo está sujeita a receita ou indicação médica.

Apenas para uso oral e nasal.

Inserir a ponta de aspiração bem no interior da boca ou narinas pode causar trauma nos tecidos.

A tampa/ponta de aspiração deve permanecer livre de resíduos.

A tampa do Little Sucker deve ser usada com o dispositivo de aspiração oral e nasal Little Sucker. Não se adapta a outros dispositivos de aspiração. Não se destina a ser utilizado com o Little Sucker de duas peças ou a ponta nasal Little Sucker.

Utilizar apenas num único paciente.



Manufactured by Neotech Products LLC. 28430 Witherspoon Pkwy, Valencia, 91355

©2023 Neotech Products LLC. Product configuration is a trademark owned by and exclusively associated with Neotech.

