


O original dos EUA feito

Little Sucker[®] Nasal Tip

DISPOSITIVO DE ASPIRAÇÃO NASAL

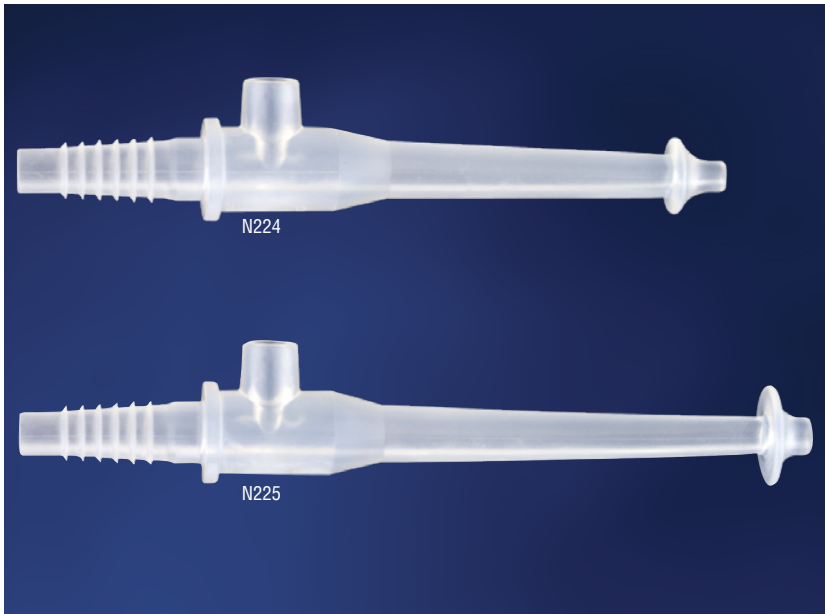

— CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS —

- Concebido para minimizar possíveis traumas no tecido
- Concebido para sucção com uma mão só
- Entrada de polegar para sucção intermitente
- Ponta macia e flexível semelhante a um aspirador nasal
- Não fabricado com látex de borracha natural ou plastificante DEHP
- Embalado individualmente

Número	Item	Qtd/Unidade
N224	Ponta nasal prematuros	50/caixa
N224TP	Prematuro 2 partes	50/caixa
N225	Ponta nasal padrão	50/caixa
N225TP	Padrão 2 partes	50/caixa



Patente dos EUA
#7,635,361; # D668,757;
#6,958,050; #D474,269



Little Sucker® Nasal Tip

DISPOSITIVO DE ASPIRAÇÃO NASAL

INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

A Ponta Nasal Little Sucker é indicada para usar como ponta do tubo de aspiração para aspirar fluidos das narinas.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- 1 Conecte a extremidade farpada da ponta de aspiração à linha de aspiração.
- 2 Defina a pressão de aspiração apropriada de acordo com o protocolo hospitalar ou recomendação médica.
- 3 Bloqueie a entrada do polegar com o polegar para começar a aspirar.
- 4 Aspirar narinas com aspiração intermitente. Remova o polegar da porta do polegar para interromper a aspiração. Bloqueie a entrada do polegar novamente para continuar a aspiração.
- 5 Aspire água estéril através da ponta de aspiração após cada utilização para limpar os detritos.
- 6 Substitua a ponta de aspiração a cada 24 horas ou de acordo com o protocolo hospitalar, o que ocorrer primeiro.

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

Segundo a legislação em vigor, a venda deste dispositivo está sujeita a receita ou indicação médica.

Apenas para uso nasal.

Inserir a ponta de aspiração bem no interior da narinas pode causar trauma nos tecidos.

A ponta de aspiração deve permanecer livre de resíduos.

Utilizar apenas num único paciente.



Manufactured by Neotech Products LLC. 28430 Witherspoon Pkwy, Valencia, 91355

©2023 Neotech Products LLC. Product configuration is a trademark owned by and exclusively associated with Neotech.

