


## NeoSucker® Curved

### DISPOSITIVO DE ASPIRAÇÃO ORAL E NASAL

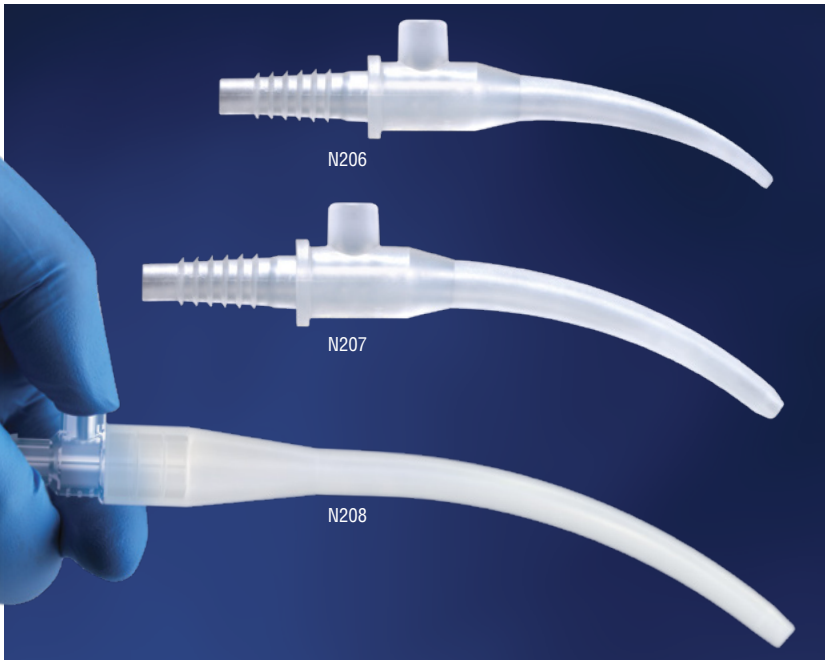

#### — CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS —

- Formato anatomicamente curvo
- Projetado para sucção com uma só mão
- Entrada de polegar para sucção intermitente
- Ponta macia e flexível semelhante a um aspirador nasal
- N208 XL ideal para pacientes pediátricos maiores ou mais velhos
- Não fabricado com látex de borracha natural ou plastificante DEHP
- Embalado individualmente

Número	Tamanho	Qtd/Unidade
N206	Prematura	50/caixa
N207	Padrão	50/caixa
N208	XL	50/caixa



Patente dos EUA  
#7,635,361; #D590,056;  
#6,958,050; #D474,269



# NeoSucker® Curved

## DISPOSITIVO DE ASPIRAÇÃO ORAL E NASAL

### INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

O NeoSucker é indicado para usar como ponta do tubo de aspiração para aspirar fluidos das narinas e boca.

### INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- 1 Conecte a extremidade farpada da ponta de aspiração à linha de aspiração.
- 2 Defina a pressão de aspiração apropriada de acordo com o protocolo hospitalar ou recomendação médica.
- 3 Bloqueie a entrada do polegar com o polegar para começar a aspirar.
- 4 Aspirar narinas com aspiração intermitente. Remova o polegar da porta do polegar para interromper a aspiração. Bloqueie a entrada do polegar novamente para continuar a aspiração.
- 5 Aspire água estéril através da ponta de aspiração após cada utilização para limpar os detritos.
- 6 Substitua a ponta de aspiração a cada 24 horas ou de acordo com o protocolo hospitalar, o que ocorrer primeiro.

### PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

Segundo a legislação em vigor, a venda deste dispositivo está sujeita a receita ou indicação médica.

Apenas para uso oral e nasal.

Inserir a ponta de aspiração bem no interior da boca ou narinas pode causar trauma nos tecidos.

A ponta de aspiração deve permanecer livre de resíduos.

Utilizar apenas num único paciente.



Manufactured by Neotech Products LLC. 28430 Witherspoon Pkwy, Valencia, 91355

©2023 Neotech Products LLC. Product configuration is a trademark owned by and exclusively associated with Neotech.

