


NeoGrip[®]

LETKU- JA KAAPELIPIDIKE



OMINAISUUDET JA EDUT

- Auttaa pitämään putket, kaapelit ja piirit yhdessä
- Helpottaa potilaan liikkumista
- Kiinnittyy liinavaatteisiin tai vaatteisiin vahingoittamatta niitä
- Avuksi kenguruhoidon aikana
- Avautuu ja sulkeutuu toistuvasti ilman jäämiä
- Voi käyttää sekä klinisissä että kotihoitoympäristöissä
- Erinomainen liikkuville potilaille
- Valmistuksessa ei käytetty luonnonkumia (lateksia) tai DEHP-ftalaattia (pehmenntä)

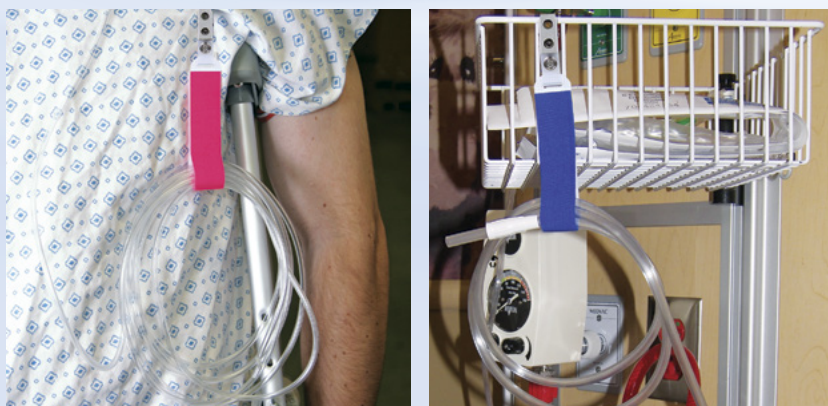

Määrä	Väri	Määrä/Yksikkö
N601	Sinivihreä (VersaGrip)	40/laatikko
N602	Pinkki/Sininen	40/laatikko
N602B	Sininen	40/laatikko
N602P	Pinkki	40/laatikko
N602R	Punainen	40/laatikko
N602G	Vihreä	40/laatikko
N602Y	Keltainen	40/laatikko
N602O	Oranssi	40/laatikko
N602V	Violetti	40/laatikko
N603	Valkoinen	40/laatikko

Patent #D814,568



Kliinikon keksimä



Valmistettu USA:ssa

NeoGrip®

LETKU- JA KAAPELIPIDIKE

KÄYTTÖAIHEET

NeoGrip/VersaGrip on tarkoitettu letkujen, kaapeleiden ja piirien järjestämiseen.

KÄYTTÖOHJEET

- 1 Erottele koukku- ja silmukkamateriaali toisistaan.
- 2 Aseta letkut, kaapelit ja piirit.
- 3 Kohdista koukku ja silmukka, ja kiinnitä painamalla.
- 4 Poistaessasi irrota hitaasti koukku ja silmukka toisistaan, ja poista letkut, kaapelit ja piirit varovasti.

Huomautus: Vaihda välittömästi, jos koukku ja silmukka ovat kuluneet.

HUOMIOT

Älä käytä, jos koukku ja silmukka ovat kuluneet.
Vain yhden potilaan käyttöön.



Manufactured by Neotech Products LLC. 28430 Witherspoon Pkwy, Valencia, 91355



©2026 Neotech Products LLC. Product configuration is a trademark owned by and exclusively associated with Neotech. M801 Rev A 2026.03.01