

# NeoShades<sup>®</sup> med Plåsterfästen

ÖGONSKYDD VID FOTOTERAPI



N724



N725



N726



## FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

- Mjuka, vadderade ögonskydd med snygg solglasögondesign
- Ögonfickor utformade för patientkomfort och -säkerhet (N724, N725, N726)
- Hudvänliga NeoBond<sup>®</sup> hydrokolloidflärpar håller NeoShades på plats
- Innehåller ej naturgummi eller mjukgörare (DEHP)
- Singelpackning

Antal	Punkt	Antal/Enhet
N720	Micro	50/låda
N721	Små	50/låda
N722	Stor	50/låda
Med okulära fickor		
N724	Micro	50/låda
N725	Små	50/låda
N726	Stor	50/låda

Amerikanskt patent #8,070,288;  
Ytterligare patentansökningar

# NeoShades® med Plåsterfästen

## ÖGONSKYDD VID FOTOTERAPI

### INDIKATIONER FÖR ANVÄNDNING

NeoShades® används för att täcka barnets ögon under fototerapi. De är avsedda för barn (nyfödda, spädbarn och barn).

### ANVÄNDARINSTRUKTIONER

#### Förberedelser

##### 1 Välj rätt storlek.

Ungefärlig dimensionering:  
Micro – 28 veckor och yngre  
Small – 29-36 veckor  
Large – 37 veckor och äldre

##### 2 Rengör och torka huden vid tinningarna enligt sjukhusets rutiner.

*Obs! Det är viktigt att huden är så ren och torr som möjligt. Hydrokolloida, självhäftande flikar fäster inte ordentligt på fuktig hud eller hår. Även oljor och krämer motverkar vidhäftningen.*

ANVÄND INTE SPRIT.

#### Applicering

##### 1 Avlägsna försiktigt de hydrokolloida flikarna från ögonskydden.

Innan du tar bort plastskydden måste de hydrokolloida, självhäftande flikarna aktivt värmas upp. Uppvärmningstekniken är enligt följande: håll mellan handflatorna i minst 60 sekunder, håll i närheten av en strålningsvärmare i 10-15 sekunder eller håll mot en kemisk hälvärmare i 10-15 sekunder.

##### 2 Dra av och kasta plastskydden. Placera de hydrokolloida, självhäftande flikarna på tinningarna, och håll på plats i 60 sekunder så att de fäster ordentligt.

##### 3 Täck ögonen med NeoShades, och fäst försiktigt de hydrokolloida, självhäftande flikarna.

*Obs! Lämna en del av fästet avtäckt för enklare borttagning.*

#### Avlägsning

##### 1 Byt ut de hydrokolloida, självhäftande NeoShade-flikarna på huden var 5:e dag eller enligt sjukhusets rutiner, beroende på vad som inträffar först.

##### 2 Håll kanten på den hydrokolloida, självhäftande fliken, och separera långsamt NeoShades från fliken.

##### 3 Saturera de hydrokolloida, självhäftande flikarna med vatten eller en saltlösning.

##### 4 Dra långsamt bort den hydrokolloida, självhäftande flikarna från huden samtidigt som du svabbar med vatten eller en saltlösning.

Upprepa på motsatt sida.

### KONTRAINDIKATIONER, VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHET

NeoShades med plåsterfäste är kontraindicerat för patienter med ansiktsmissbildningar, infekterade eller irriterade hudområden som kan förhindra korrekt placering av fästena. Ögonskyddet är inte avsett för användning på vuxna.

Denna produkt får, enligt amerikansk lag, endast säljas av eller på ordination av läkare.

NeoShades ska endast användas under kontinuerlig, direkt övervakning av utbildad vårdpersonal.

Vid periodvis användning av NeoShades måste man alltid bedöma de hydrokolloida flikarnas integritet när ögonskydden avlägsnas. Om de hydrokolloida flikarna tenderar att lossna från huden, ska du avlägsna dem enligt användarinstruktionerna och applicera nya hydrokolloida flikar innan fototerapi återupptas.




Hydrokolloida, självhäftande flikar fäster inte ordentligt på fuktig hud eller hår. Även oljor och krämer motverkar vidhäftningen.

Använd inte sprit till att rengöra huden innan applicering.

Avlägsna genast om hudirritation uppstår.

Endast avsedd för användning till en patient.

Allmänna transport- och lagringsmetoder är tillämpliga.

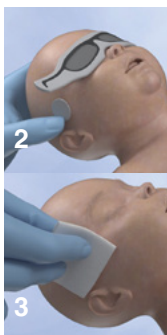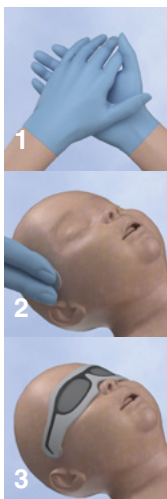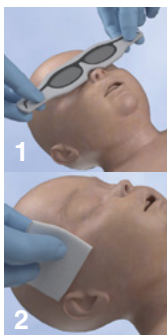

Tillverkad i USA

Manufactured by Neotech Products LLC. 28430 Witherspoon Pkwy, Valencia, 91355



EMERGO EUROPE  
Westervoortsedijk 60  
6827 AT, Arnhem  
The Netherlands



PPE Regulation (EU) 2016/425  
Notified Body: BSI Group (2797),  
Say Building, John M. Keynesplein 9  
1066 EP Amsterdam, Netherlands