


EZCare™ Softouch

TRAKEOSTOMIAPUTKEN PIDIKE

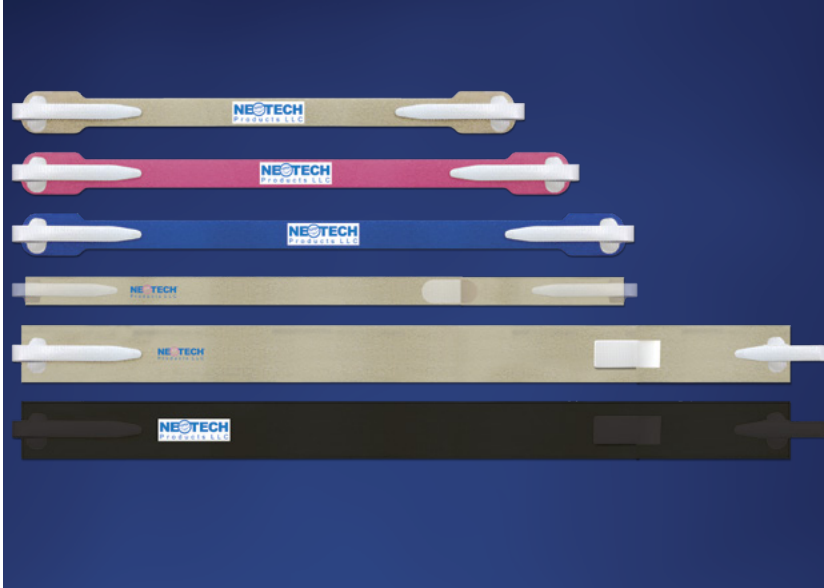

OMINAISUUDET JA EDUT

- Paksu NeoFoam® Ultra paremman pysyvyyden takaamiseksi
- Pehmeä, hengittävä ja ihoa ärsyttämätön NeoFoam imee hien
- Suunniteltu miellyttäväksi
- Kevyt ja vartalonmyötäinen
- N925 ja N926 voidaan leikata sopivan kokoisiksi
- Ainutlaatuinen materiaali auttaa estämään liukumista
- Valmistuksessa ei käytetty luonnonkumia (lateksia) tai DEHP-ftalaattia (pehmenintä)
- Yksittäispakattu

Määrä	Koko	HCPCS	Määrä/
N9106	6" (152mm)	Yksiosainen	A7526 20/box
N9107	7" (178mm)	Yksiosainen	A7526 20/box
N9108	8" (203mm)	Yksiosainen	A7526 20/box
N9109	9" (229mm)	Yksiosainen	A7526 20/box
N9110	10" (254mm)	Yksiosainen	A7526 20/box
N9111	11" (279mm)	Yksiosainen	A7526 20/box
N925*	11" (279mm)	2-osainen(rusketus vain)	A7526 20/box
N926**	18" (457mm)	2-osainen(rusketus vain)	A7526 20/box
N926BK-10**	18" (457mm)	2-osainen(vain musta)	10/pack

Rusketus=TN, Vaaleanpunainen=PK, Sininen=BL

*1/2" (13mm) pitkä

**1" (25mm) pitkä



Vanhempi keksi



Valmistettu USA:ssa

EZCare™ Softouch

TRAKEOSTOMIAPUTKEN PIDIKE

KÄYTTÖAIHEET

EZCare Softouch on tarkoitettu potilaan trakeostomiaputken kiinnittämiseen. Se on tarkoitettu käytettäväksi lapsipotilailla (vastasyntyneet, vauvat ja lapset).

KÄYTTÖOHJEET

Mittaaminen

Valitse oikea koko käyttämällä toimitettua EZCare Softouch-mittanauhaa.

Aseta aloitusviiva vasemman puolen laipan kohdalle ja kierrä niskan takaa oikeaan laippaan. Jos mitta on kahden koon välissä, kokeile ensin suurempaa kokoa.

Yksiosainen (N9105-N9111)

- 1 Pidä sileä, valkoinen puoli kaulaa kohti ja vie koukullinen kieleke laipan läpi laatan toiselle puolelle.
- 2 Vedä kieleke takaisin laipan yli ja paina valkoista tarrakangasta tiukasti kauluksen kankaaseen, jotta se kiinnittyy varmasti kunnolla.
- 3 Kierrä EZCare kaulan ympäri ja vie koukullinen kieleke laipan läpi laatan toiselle puolelle.
- 4 Vedä kieleke takaisin laipan yli ja paina valkoista tarrakangasta tiukasti kauluksen kankaaseen, jotta se kiinnittyy varmasti kunnolla.

Huomautus: Varmista, että EZCare on tiukalla, mutta ei venynyt liikaa. Säädä tarvittaessa.

- 5 Vaihda EZCare Softouch 5 päivän välein tai sairaalan protokollan mukaisesti, sen mukaan, kumpi on aiemmin.

Vaihda välittömästi, jos koukullinen kieleke on kulunut tai näkyvästi likainen.

2-osainen (N925-N926)

- 1 Erotta kaksi osaa toisistaan.
- 2 Pidä sileä, valkoinen puoli kaulaa kohti ja vie koukulliset kielekkeet laippojen läpi laatan kullekin puolelle.
- 3 Vedä kieleke takaisin laipan yli ja paina valkoista tarrakangasta tiukasti kauluksen kankaaseen, jotta se kiinnittyy varmasti kunnolla.
- 4 Kierrä EZCare-pidikkeen molemmat puolet kaulan ympäri ja vie yhteen.

- 5 Määritä oikea pituus, vedä pidempää osaa pois päin kaulalta ja leikkaa ylimäärä.

Huomautus: Varmista, että tarrakankaan kiinnityskieleke ei osu ihoon.

- 6 Vie molemmat puolet taas yhteen ja paina valkoista tarrakankaan kiinnityskielekettä tiukasti kauluksen kankaaseen, jotta se kiinnittyy varmasti kunnolla.

Huomautus: Varmista, että EZCare on tiukalla, mutta ei venynyt liikaa. Säädä tarvittaessa.

- 7 Vaihda EZCare Softouch 5 päivän välein tai sairaalan protokollan mukaisesti, sen mukaan, kumpi on aiemmin.

Vaihda välittömästi, jos koukullinen kieleke on kulunut tai näkyvästi likainen.

HUOMIOT JA VAROITUKSET

Yhdysvaltain liittovaltion lain mukaan tämän laitteen saa myydä vain lääkäri tai lääkärin määräyksestä.

Vaihda välittömästi, jos koukullinen kieleke on kulunut tai näkyvästi likainen. Kulunut kieleke saattaa irrottaa kanyylin.

Tarkista kunto säännöllisesti estääksesi irtoamisen.

Lopeta käyttö välittömästi, jos ilmenee ihoärsytystä.

Vain yhden potilaan käyttöön.

Certified



Corporation

Manufactured by Neotech Products LLC. 28430 Witherspoon Pkwy, Valencia, 91355



Valmistettu USA:ssa