


# Neotech ChinStrap™

## TILLBEHÖR FÖR ANDNINGSSTÖD

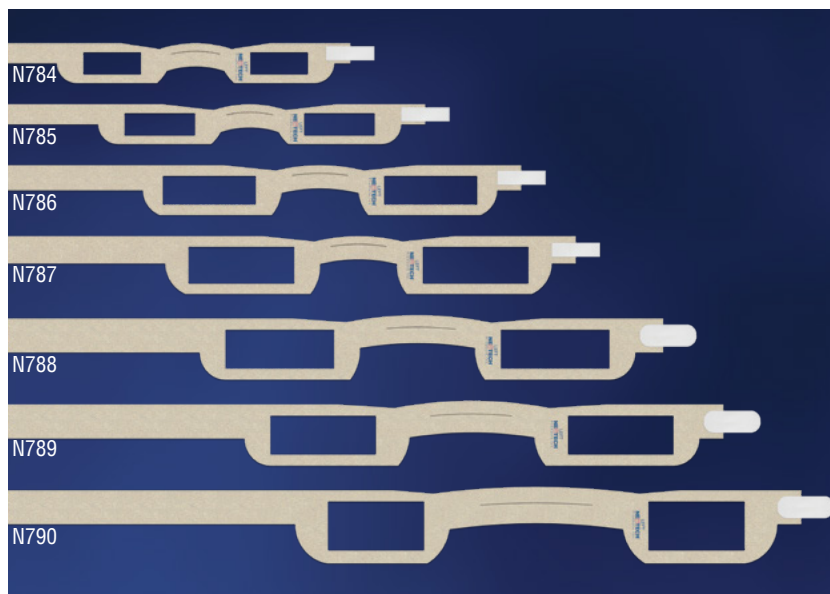

### FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

- Mjukt, ventilerande, hudvänligt NeoFoam® som transporterar bort svett
- Stor flexibilitet möjliggör minimal munrörelse
- Formar sig och är justerbar
- Delad hakdesign för komfort och stabilitet
- Öronöppningar för att förhindra vikning
- Utformad för att minska risken för trycksår eller nekros
- Unikt material hjälper till att förhindra glidning
- Innehåller ej naturgummi eller mjukgörare (DEHP)
- Singelpackning

Antal	Storlek	Antal/Enhet
N784	Nano	20/låda
N785	Micro	20/låda
N786	Små	20/låda
N787	Stor	20/låda
N788	X-stor	20/låda
N789	Makro	20/låda
N790	Jumbo	20/låda

Amerikanskt patent #10,342,693



# Neotech ChinStrap™

## TILLBEHÖR FÖR ANDNINGSTÖD

### INDIKATIONER FÖR ANVÄNDNING

Neotech ChinStrap är avsedd för att hjälpa hålla patientens mun stängd under respiratorbehandling. Den är avsedd att användas på pediatrika patienter (nyfödda, spädbarn, barn och ungdomar) och vuxna patienter.

### ANVÄNDARINSTRUKTIONER

- 1 Välj rätt storlek genom att mäta från mitten av hakan, längs örat, över huvudkronan, längs det andra örat och tillbaka till mitten av hakan.

N784 Nano: passar huvudomkrets 22-27 cm

N785 Micro: passar huvudomkrets 28-35 cm

N786 Small: passar huvudomkrets 33-42 cm

N787 Large: passar huvudomkrets 36-46 cm

N788 X-Large: passar huvudomkrets 38-53 cm

N789 Macro: passar huvudomkrets 39-58 cm

N790 Jumbo: passar huvudomkrets 40-66 cm

- 2 Placera Neotech ChinStrap på hakan med den tunnare delen över framsidan av hakan och den bredare delen under hakan.

*Obs! Endast den vita sidan av bandet ska placeras mot huden.*

- 3 Dra försiktigt bandet mot bakkdelen av huvudkronan med öronen placerade i öronöppningarna och fäst sedan krokfliken på bandet. Sidan märkt med "LEFT" ska sitta under patientens vänstra öra.

*Obs! Kan klippas till önskad längd. Se till att remmen inte sitter för hårt eller trycker mot öronen. Hakdelen ska överlappa remmen helt.*



- 4 Byt efter 5 dagar eller enligt riktlinjerna på sjukhuset, beroende på vilket som inträffar först.

Byt ut omedelbart vid tecken på slitage eller smuts.

### VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHET

Denna produkt får, enligt amerikansk lag, endast säljas av eller på ordination av läkare.

Neotech ChinStrap ska endast användas under kontinuerlig direkt övervakning av utbildad vårdpersonal. ChinStrap kan medföra en potentiell kvävningsrisk.

Avlägsna genast om hudirritation uppstår.

Endast avsedd för användning till en patient.