


# Neotech ChinStrap™

## HENGITYSTUEN LISÄTARVIKE

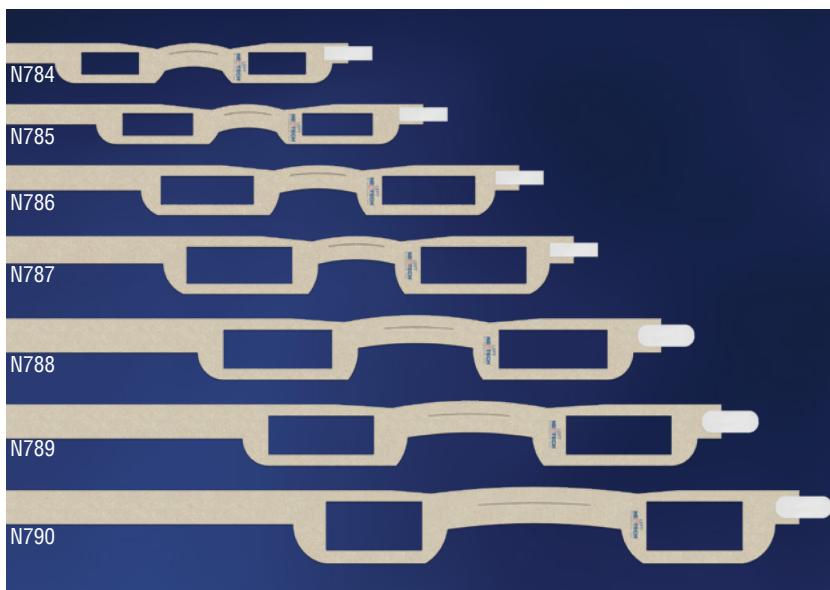

### OMINAISUUDET JA EDUT

- Pehmeä, hengittävä ja ihoa ärsyttämätön NeoFoam® imee hien
- Joustavuus mahdollistaa suun liikkeen minimoimisen
- Ihonmyötäinen ja säädettävä
- Jaettu leukakappale mukavuutta ja vakautta varten
- Korva-aukot estävät taittumista
- Suunniteltu vähentämään painehaavojen tai nekroosin riskiä
- Ainutlaatuinen materiaali auttaa estämään liukumista
- Valmistuksessa ei käytetty luonnonkumia (lateksia) tai DEHP-ftalaattia (pehmenintä)
- Yksittäispakattu

Määrä	Koko	Määrä/Yksikkö
N784	Nano	20/laatikko
N785	Mikro	20/laatikko
N786	Pieni	20/laatikko
N787	Suuri	20/laatikko
N788	Erittäin suuri	20/laatikko
N789	Makro	20/laatikko
N790	Jumbo	20/laatikko

Yhdysvaltain patentti #10,342,693



Valmistettu USA:ssa

# Neotech ChinStrap™

## HENGITYSTUEN LISÄTARVIKE

### KÄYTTÖAIHEET

Neotech ChinStrap on tarkoitettu auttamaan potilaan suun pitämisessä suljettuna hengityshoidon aikana. Se on tarkoitettu käytettäväksi lapsipotilailla (vastasyntyneet, vauvat ja lapset) ja aikuisilla potilailla.

### KÄYTTÖOHJEET

- 1 Valitse oikea koko mittaamalla leuan keskikohdasta, korvan päältä, pääläen yli, toisen korvan päältä ja takaisin leuan keskikohtaan.



N784 Nano: sopii pään ympärysmittaan 22–27 cm

N785 Micro: sopii pään ympärysmittaan 28–35 cm

N786 Small: sopii pään ympärysmittaan 33–42 cm

N787 Large: sopii pään ympärysmittaan 36–46 cm

N788 X-Large: sopii pään ympärysmittaan 38–53 cm

N789 Macro: sopii pään ympärysmittaan 39–58 cm

N790 Jumbo: sopii pään ympärysmittaan 40–66 cm



- 2 Aseta Neotech ChinStrap -hihna leukaan siten, että ohuempi osa on leuan etupuolella ja leveämpi osa leuan alla.



*Huomautus: Vain hihnan valkoinen puoli tulee asettaa ihoa vasten.*

- 3 Vedä hihnaa varovasti pään takaosaa kohti niin, että korvat ovat korva-aukkojen sisällä, ja kiinnitä koukullinen kieleke hellävaroen hihnaan. "LEFT"-merkinnällä varustetun puolen on oltava potilaan vasemman korvan alla.

*Huomautus: Leikattavissa sopivaan kokoon. Varmista, että hihna ei ole liian kireällä tai paina korvia.*

*Koukullisen kielekkeen on oltava kokonaan hihnan päällä.*

- 4 Vaihda 5 päivän välein tai sairaalan protokollan mukaisesti, sen mukaan, kumpi on aiemmin.

Vaihda välittömästi, jos kulunut tai näkyvästi likainen.

### HUOMIOT JA VAROITUKSET

Yhdysvaltain liittovaltion lain mukaan tämän laitteen saa myydä vain lääkäri tai lääkärin määräyksestä.

Neotech ChinStrap -hihnaa saa käyttää vain, kun potilas on terveydenhuollon ammattilaisten jatkuvassa, suorassa valvonnassa.

ChinStrap voi aiheuttaa kuristumisvaaran.

Lopeta käyttö välittömästi, jos ilmenee ihoärsytystä.

Vain yhden potilaan käyttöön.