


NeoSnug[®]

SLANGHÅLLARE

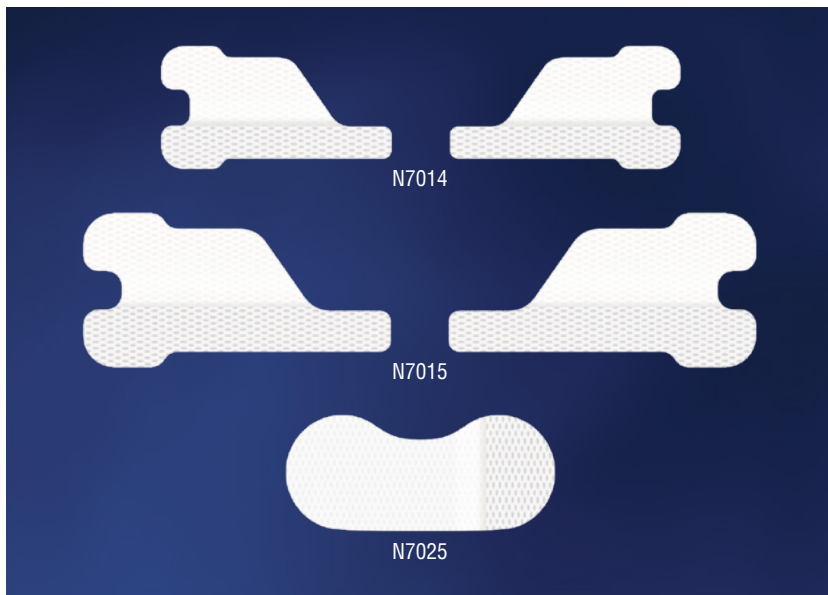

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

- Hudvänlig NeoBond[®] vidhäftande hydrokolloidbas
- Unik form av vår ursprungliga NeoSnug för optimal säkring av slangarna nära näsborrarna (N7014, N7015)
- NeoSnug Oral är idealisk för att säkra slangarna under läpparna (N7025)
- Vikbar flärp konstruerad för att avlasta påfrestningar på slangarna
- Permanent fasthållande flärp håller slangarna säkert på plats
- Icke-vävt tyg formar sig efter ansikte och kropp
- Två per set med vänster och höger slanghållare

| Antal | Storlek | Antal/Enhet |
|----------|------------|-------------|
| N7014-15 | Micro | 30/låda* |
| N7015-15 | Små | 30/låda* |
| N7025-40 | Small Oral | 40/låda |

*15 set med 2 (vänster/höger)



NeoSnug®

SLANGHÅLLARE

INDIKATIONER FÖR ANVÄNDNING

NeoSnug är avsedd för att stödja, säkra och hålla magsonder på patienters hud.

ANVÄNDARINSTRUKTIONER

Förberedelser

Rengör och torka huden där NeoSnug ska placeras enligt gällande riktlinjer på sjukhuset.

Obs! Det är viktigt att huden är så ren och torr som möjligt.

NeoSnug fäster inte ordentligt på fuktig hud eller hår. Även oljor och krämer motverkar vidhäftningen.

ANVÄND INTE SPRIT.

Applicering

1 Innan du tar bort från plastskyddet måste hydrokolloidlimmet aktivt värmas upp. Uppvärmningstekniken är enligt följande: håll mellan handflatorna i minst 60 sekunder, håll i närheten av en strålningsvärmare i 10-15 sekunder eller håll mot en kemisk hälvärmare i 10-15 sekunder.

2 Dra av NeoSnug från det genomskinliga, tryckta skyddet en åt gången, placera på huden och håll på plats i 60 sekunder för att säkerställa korrekt vidhäftning.

Obs! Om endast en NeoSnug (N7014, N7015) används, spara den andra för senare användning. Kasta skyddsplasten efteråt.

3 Vik ned flärpen och dra bort det vita pappersskyddet som är märkt "1" från basen på NeoSnug. Detta exponerar den vidhäftande ytan.

4 Lägg slangen över basen.

5 Dra bort det vita pappersskyddet som är märkt "2" från flärpen och vik flärpen över slangen för att säkra den.

Obs! När den är stängd är NeoSnugs flärp konstruerad för att sitta på plats permanent. Den kan inte öppnas och stängas flera gånger.

Avlägsning

1 Byt ut NeoSnug och den anslutna slangen var femte dag eller enligt gällande riktlinjer på sjukhuset, vilket som infaller först.

2 Med slangen fortfarande fixerad, blöt NeoSnug med vatten eller koksaltlösning.

3 Dra försiktigt bort NeoSnug från huden samtidigt som du torkar av huden med vatten eller koksaltlösning.

4 Avlägsna slangen enligt gällande riktlinjer på sjukhuset och kassera NeoSnug och slangen.

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHET

Denna produkt får, enligt amerikansk lag, endast säljas av eller på ordination av läkare.

Kvävningsrisk. NeoSnug ska endast användas medan patienten står under kontinuerlig, direkt övervakning av utbildad vårdpersonal.

Risk för sväljning eller inandning.

Avlägsna genast om hudirritation uppstår.

NeoSnug fäster inte ordentligt på fuktig hud eller hår. Även oljor och krämer motverkar vidhäftningen.

Använd inte sprit till att rengöra huden innan applicering.

För engångsbruk. Återanvänd ej.

Endast avsedd för användning till en patient.



Manufactured by Neotech Products LLC. 28430 Witherspoon Pkwy, Valencia, 91355



Tillverkad i USA