


NeoSnug[®]

LETKUPIDIKE

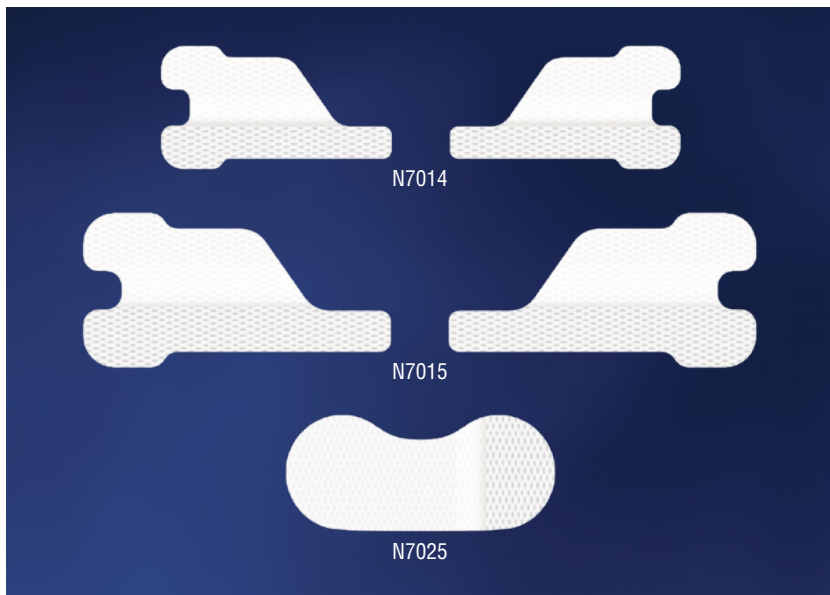

OMINAISUUDET JA EDUT

- Ihoa ärsyttämätön NeoBond[®]-hydrokolloidiliima-alusta
- Alkuperäisen NeoSnugin ainutlaatuinen muoto sopii putkien kiinnittämiseen sierainten läheisyyteen (N7014, N7015)
- NeoSnug Oral sopii putkien kiinnittämiseen huulten alle (N7025)
- Päälle taittuva läppä, joka vähentää putkien rasitusta
- Pysyvä, taittuva läppä pitää putket tukevasti paikallaan
- Kuitukangas muotoutuu kasvojen tai vartalon mukaan
- Kaksi kappaletta pakkauksessa, vasen ja oikea putkenpidike

Määrä	Koko	Määrä/Yksikkö
N7014-15	Micro	30/laatikko*
N7015-15	Pieni	30/laatikko*
N7025-40	Pieni suullinen	40/laatikko

*15 sarjaa, 2 kpl (vasen/oikea)

NeoSnug®

LETKUPIDIKE

KÄYTTÖAIHEET

NeoSnug on tarkoitettu nenämahaletkujen tukemiseen ja kiinnittämiseen sekä paikallaan pitämiseen potilaan iholla.

KÄYTTÖOHJEET

Valmistelu

Puhdista ja kuivaa iho, jolle NeoSnug asetetaan, sairaalan protokollan mukaisesti.

Huomautus: On tärkeää, että iho on mahdollisimman puhdas ja kuiva. NeoSnug ei kiinnity kunnolla kosteaan ihoon tai hiuksiin/karvoihin. Myös öljyt ja voiteet heikentävät kiinnitystä.

ÄLÄ KÄYTÄ ALKOHOLIA.

Kiinnittäminen

- 1 Ennen muovikalvon irrottamista hydrokolloidiliimaa on lämmitettävä aktiivisesti. Mahdollisia lämmitystekniikoita: pidä liuskoja kämmenten välissä vähintään 60 sekuntia, säteilevän lämpölähteen lähistöllä 10–15 sekuntia tai kemiallista lämmitintä vasten 10–15 sekuntia.
- 2 Irrota NeoSnug-letkupidikkeet yksi kerrallaan kirkkaasta muovikalvosta, aseta NeoSnug iholle ja pidä sitä paikallaan 60 sekunnin ajan niin, että se kiinnittyy varmasti kunnolla.

Huomautus: Jos käytät ainoastaan yhden NeoSnug-letkupidikkeen (N7014, N7015), säästä toinen myöhempää käyttöä varten. Hävitä kalvo, kun olet valmis.

- 3 Taita läppä ja irrota NeoSnug-letkupidikkeen takaosasta numerolla "1" merkitty valkoinen paperikalvo. Tämä paljastaa liimapinnan.
- 4 Kiinnitä letku letkupidikkeen takaosaan.
- 5 Irrota läpistä numerolla "2" merkitty valkoinen paperikalvo ja taita läppä letkun ylle, jotta se kiinnittyy kunnolla.

Huomautus: NeoSnug-läppä on suunniteltu pysymään pysyvästi paikoillaan sulkemisen jälkeen. Sitä ei voi avata ja sulkea toistuvasti.

Poistaminen

- 1 Vaihda NeoSnug ja sen kanssa käytettävä letku 5 päivän välein tai sairaalan protokollan mukaisesti, sen mukaan, kumpi on aiemmin.
- 2 Kyllästä NeoSnug vedellä tai suolalioksella, kun se on edelleen kiinni letkussa.
- 3 Irrota NeoSnug hitaasti ihosta pyyhkien ihoa samalla vedellä tai suolaliuksella.
- 4 Poista letku sairaalan protokollan mukaisesti ja hävitä NeoSnug ja letku.

HUOMIOT JA VAROITUKSET

Yhdysvaltain liittovaltion lain mukaan tämän laitteen saa myydä vain lääkäri tai lääkärin määräyksestä.

Tukehtumisvaara. NeoSnug-letkupidikettä saa käyttää vain, kun potilas on koulutettujen terveydenhuollon ammattilaisten jatkuvassa, suorassa valvonnassa.

Aspiraatio- tai nielemisriski.

Lopeta käyttö välittömästi, jos ilmenee ihoärsytystä.

NeoSnug ei kiinnity kunnolla kosteaan ihoon tai hiuksiin/karvoihin.

Myös öljyt ja voiteet heikentävät kiinnitystä.

Älä käytä alkoholia ihon puhdistamiseen ennen kiinnitystä.

Kertakäyttöinen. Ei saa käyttää uudelleen.

Vain yhden potilaan käyttöön.



Manufactured by Neotech Products LLC. 28430 Witherspoon Pkwy, Valencia, 91355

©2026 Neotech Products LLC. Product configuration is a trademark owned by and exclusively associated with Neotech. M840 Rev A 2026.06.15



Valmistettu USA:ssa