
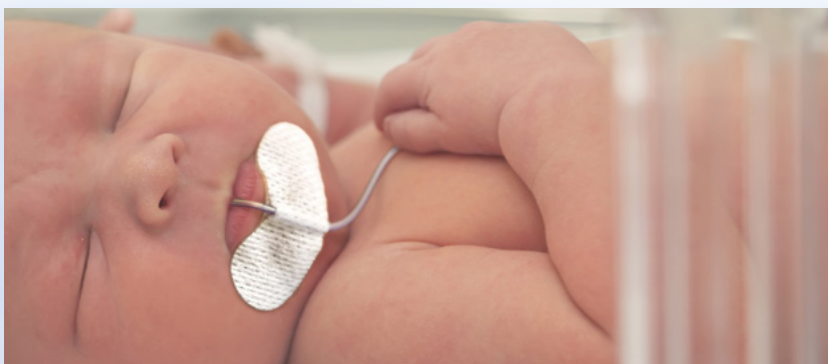


NeoSnug[®]

SLANGEHOLDER

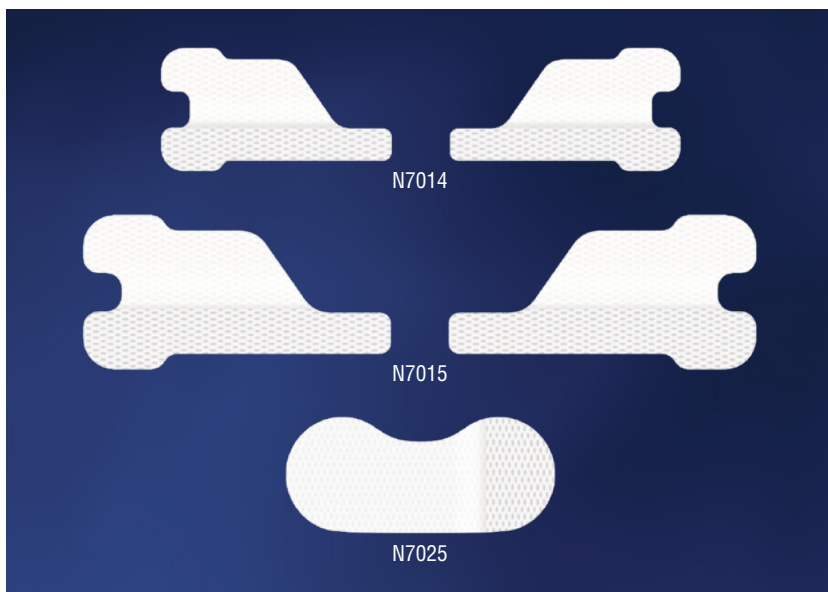

FUNKTIONER OG FORDELE

- Hudvenlig NeoBond[®] hydrokolloidklæbemiddelbase
- Unik form som den originale NeoSnug, hvilket er ideelt til fastgørelse af slanger tæt på næseborene (N7014, N7015)
- NeoSnug Oral, der er ideel til fastgørelse af slanger under læberne (N7025)
- Foldbar flap, der er konstrueret til at aflaste slangerne
- Permanent holdeklap holder slangerne sikkert på plads
- Ikke-vævet stof, der former sig efter ansigt eller krop
- To styk pr. sæt med venstre og højre slangeholder

Antal	Størrelse	Antal/Enhed
N7014-15	Mikro	30/boks*
N7015-15	Lille	30/boks*
N7025-40	Lille Oral	40/boks

*15 sæt af 2 (venstre/højre)

NeoSnug®

SLANGEHOLDER

INDIKATIONER FOR BRUG

NeoSnug er beregnet til at støtte, sikre og fastholde gastrointestinale slanger på patientens hud.

BRUGSANVISNING

Forberedelse

Rens og tør huden der, hvor NeoSnug skal placeres i henhold til hospitalets protokol.

Bemærk: Det er vigtigt, at huden er så ren og tør som muligt. NeoSnug klæber ikke ordentligt på fugtig hud eller hår. Olier og lotioner vil også påvirke klæbeevnen negativt.

BRUG IKKE ALKOHOL.

Påsætning

1 Inden fjernelse fra plastforingen skal hydrokolloidklæbemidlet aktivt opvarmes. Opvarmningsteknikker omfatter: hold mellem håndfladerne i mindst 60 sekunder, hold tæt på en strålevarmer i 10-15 sekunder eller hold mod en kemisk hælvarmer i 10-15 sekunder.

2 Træk NeoSnug af den klare, trykte foring én ad gangen, læg dem på huden, og hold dem på plads i 60 sekunder for at sikre korrekt vedhæftning.

Bemærk: Hvis du kun bruger én NeoSnug (N7014, N7015), skal du gemme den anden til senere brug. Kassér foring bagefter.

3 Fold klappen ned, og træk det hvide papir, mærket "1", væk fra det nederste af NeoSnug. Dette vil blotlægge den selvklæbende overflade.

4 Læg slangen på tværs af det nederste.

5 Træk det hvide papir mærket "2" væk fra flappen, og fold flappen over slangen for at fastgøre den.

Bemærk: Når NeoSnug-klappen er lukket, er den konstrueret til at forblive permanent på plads. Du kan ikke åbne og lukke den flere gange.

Fjernelse

1 Udskift NeoSnug og de tilhørende slanger hver 5. dag eller i henhold til hospitalets protokol, alt efter hvad der kommer først.

2 Mens slangen stadig er fastgjort, mættes NeoSnug med vand eller saltvand.

3 Træk langsomt NeoSnug væk fra huden, mens du tørrer huden med vand eller saltvand.

4 Tag slangen af i henhold til hospitalets protokol, og kassér NeoSnug og slangen.

FORHOLDSREGLER OG ADVARSLER

Føderal lovgivning begrænser denne enhed til salg af eller efter ordre fra en læge.

Kvælningsfare. NeoSnug bør kun anvendes, mens patienten er under konstant, direkte opsyn af uddannet sundhedspersonale.

Risiko for indtagelse eller aspiration.

Afbryd straks brugen, hvis der opstår hudirritation.

NeoSnug klæber ikke ordentligt på fugtig hud eller hår. Olier og lotioner vil også påvirke klæbeevnen negativt.

Brug ikke alkohol til at rense huden før påføring.

Til engangsbrug. Må ikke genbruges.

Kun til brug for en enkelt patient.

