


NeoBar[®]

ET-PUTKEN PIDIKE

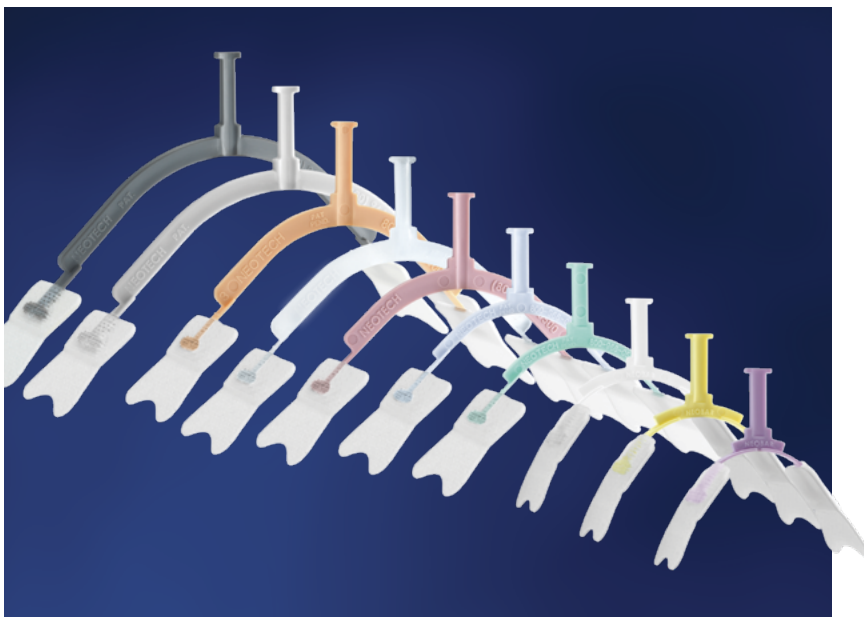

OMINAISUUDET JA EDUT

- Ihoa ärsyttämättömät NeoBond[®]-hydrokolloidikiinnikkeet
- Saatavilla makro- ja jumbokokoina lääketieteellisen luokan akryyliimalla
- Suunniteltu vähentämään intubaation irtoamista, ehkäisemään kitalakivaurioita ja mahdollistamaan paremman suuhygienian
- Poistaa tarpeen teipin käyttöön nenän tai suun läheisyydessä
- Värikoodatut koot tunnistamisen helpottamiseksi
- Valmistuksessa ei käytetty luonnonkumia (lateksia) tai DEHP-ftalaattia (pehmittintä)
- Yksittäispakattu

Määrä	Koko	Väri	Määrä/Yksikkö
N709	Mini	Violetti	5/laatikko
N710	Ultra	Keltainen	5/laatikko
N711	Mikro	Valkoinen	5/laatikko
N712	Pieni	Vihreä	5/laatikko
N713	Suuri	Sininen	5/laatikko
N714	Erittäin suuri	Ruusu	5/laatikko
N715H	Makro	Selkeä	5/laatikko
N716H	Jumbo	Harmaa	5/laatikko
Lääketieteellisen luokan akryyliimalla			
N715F	Macro	Persikka	5/laatikko
N716F	Jumbo	Hiili	5/laatikko
Valikoima			
N718 Kuljetus (1 jokainen N709, N710, N711, N712, N713, N714)			



KÄYTTÖAIHEET

NeoBar on tarkoitettu endotrakeaaliputken kiinnittämiseen. Se on tarkoitettu käytettäväksi lapsipotilailla (vastasyntyneet, vauvat ja lapset).

KÄYTTÖOHJEET

Valmistelu

- 1 Kun potilas on intuboitu, valitse oikeankokoinen NeoBar käyttämällä toimitettua NeoBar-mittanauhaa. Aseta nauhan keskiviiva nenän väliseinän kohdalle ja kierrä korvaan. Väri, joka osuu korvakäytävän aukon kohdalle, vastaa asianmukaista NeoBar-pidikkeen kokoa.

Huomautus: jos olet epävarma kahden koon suhteen, kokeile ensin pienempää kokoa.

- 2 Varmista hyvä istuvuus asettamalla NeoBar suun keskelle, ylä- ja alahuulen välille. NeoBar ei saa koskettaa huuliin. Hydrokolloidikiekkien on oltava aivan korvan edessä.
- 3 Puhdista ja kuivaa poskien iho sairaalan käytännön mukaisesti.

Huomautus: On tärkeää, että iho on mahdollisimman puhdas ja kuiva. Hydrokolloidiset liimaliuskat eivät tartu kunnolla kosteaan ihoon tai hiuksiin/karvoitukseen. Öljyt ja voiteet heikentävät kiinnittymistä.

ÄLÄ KÄYTÄ ALKOHOLIA.

Kiinnittäminen

- 1 Ennen muovikalvojen irrottamista hydrokolloidisia liimaliuskoja on lämmitettävä aktiivisesti. Mahdollisia lämmitystekniikoita: pidä liuskoja kämmenten välissä vähintään 60 sekuntia, säteilevän lämpölähteen lähistöllä 10–15 sekuntia tai kemiallista lämmitintä vasten 10–15 sekuntia.
- 2 Irrota muovikalvot ja hävitä ne. Kiinnitä hydrokolloidiset liimaliuskat korvien eteen luun päälle ja pidä niitä paikallaan 60 sekunnin ajan niin, että ne kiinnittyvät varmasti kunnolla.
Huomautus: Varmista, että ET-putki on siltaosan alapuolella, jotta suulakeen tai ikeniin kohdistuu pienempi paine.
- 3 Kiedo 12,5 mm valkoista tai kangasteippiä ensin kokonaan NeoBar-siltaosan ympärille, jatka sitten kiertämällä teippiä sekä siltaosan että ET-putken ympärille.

Poistaminen

- 1 Vaihda NeoBar 5 päivän välein tai sairaalan protokollan mukaisesti, sen mukaan, kumpi on aiemmin.
- 2 Kierrä teippi auki erottaaksesi ET-putken NeoBar-siltaosasta.

- 3 Kyllästä kiekkiekkeet vedellä tai suolaliuksella.
- 4 Irrota hydrokolloidiset liimaliuskat hitaasti ihosta pyyhkien samalla vedellä tai suolaliuksella.

VASTA-AIHEET, HUOMIOT JA VAROITUKSET

NeoBar on vasta-aiheinen potilaille, joilla on infektoituneita tai hiertyneitä ihoalueita, joihin ei voi kiinnittää kiekkiekkieitä kunnolla.

Sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi aikuisilla.

Yhdysvaltain liittovaltion lain mukaan tämän laitteen saa myydä vain lääkäri tai lääkärin määräyksestä.

NeoBar-pidikettä saa käyttää vain, kun potilas on koulutettujen terveydenhuollon ammattilaisten jatkuvassa, suorassa valvonnassa.

Lopeta käyttö välittömästi, jos ilmenee ihoärsytystä.

NeoBar ei saa koskettaa huuliin.

Hydrokolloidiset liimaliuskat eivät tartu kunnolla kosteaan ihoon tai hiuksiin/karvoitukseen. Öljyt ja voiteet heikentävät kiinnittymistä.

Älä käytä alkoholia ihon puhdistamiseen ennen kiinnitystä.

Vain yhden potilaan käyttöön.