


NeoBar[®]

ET SLANGEHOLDER

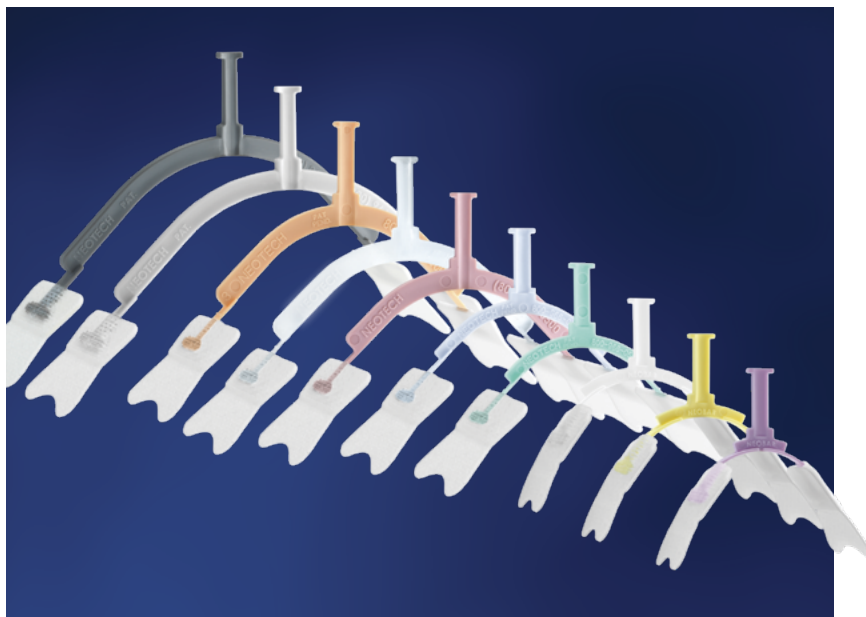

FUNKTIONER OG FORDELE

- Hudvenlige NeoBond[®] hydrokolloidflapper
- Fås i Makro- og Jumbo-størrelser med medicinsk akrylklæbemiddel
- Designet til at reducere ekstubationer, hjælpe med at forhindre traumer i ganen og give bedre mundpleje
- Eliminere behovet for tape ved næse eller mund
- Farvekodede størrelser
- Ikke fremstillet med naturgummilatex eller blødgøringsmidlet DEHP
- Individuelt emballeret

| Antal | Størrelse | Farve | Antal/Enhed |
|---|-------------|---------|-------------|
| N709 | Mini | Lilla | 5/boks |
| N710 | Ultra | Gul | 5/boks |
| N711 | Micro | Hvid | 5/boks |
| N712 | Lille | Grøn | 5/boks |
| N713 | Stor | Blå | 5/boks |
| N714 | Ekstra stor | Rose | 5/boks |
| N715H | Makro | Klar | 5/boks |
| N716H | Jumbo | Grå | 5/boks |
| Med medicinsk akrylklæbemiddel | | | |
| N715F | Makro | Fersken | 5/boks |
| N716F | Jumbo | Kulstof | 5/boks |
| Assorteret | | | |
| N718 Transportere (1 hver N709, N710, N711, N712, N713, N714) | | | |



INDIKATIONER FOR BRUG

NeoBar er indiceret til brug til at fastgøre en endotrakealslange. Den er beregnet til brug på pædiatriske (nyfødte, spædbørn og børn) patienter.

BRUGSANVISNING

Forberedelse

- 1 Når patienten er intuberet, skal du vælge den rigtige størrelse NeoBar ved at bruge det medfølgende NeoBar-målebånd. Placer strimlens midterste linje ved næseskillevæggen, og før den rundt til øret. Farven, der ligger over åbningen af øregangen, svarer til den korrekte NeoBar-størrelse.

Bemærk: Hvis du er usikker på valget mellem to størrelser, skal du prøve med den mindste størrelse først.

- 2 For at sikre korrekt pasform skal du placere NeoBar på tværs midtpå munden, mellem over- og underlæbe. NeoBar bør ikke komme i kontakt med læberne. Hydrokolloidfligene skal være lige foran øret.
- 3 Rengør og tør huden på kinderne i henhold til hospitalsprotokol.

Bemærk: Det er vigtigt, at huden er så ren og tør som muligt. De klæbende hydrokolloidflige vil ikke klæbe ordentligt på fugtig hud eller hår. Olier og lotioner vil påvirke vedhæftningen negativt.

BRUG IKKE ALKOHOL.

Påsætning

- 1 Før fjernelse af plastforinger skal de klæbende hydrokolloidflige opvarmes aktivt. Opvarmningsteknikker omfatter: hold mellem håndfladerne i mindst 60 sekunder, hold tæt på en strålevarmer i 10-15 sekunder, eller hold mod en kemisk hælvarmer i 10-15 sekunder.
- 2 Træk plastikforingerne af, og smid dem ud. Påfør de klæbende hydrokolloidflige foran øret på knoglen, og hold dem på plads i 60 sekunder for at sikre korrekt vedhæftning.

Bemærk: Sørg for, at ET-slangen er under platformen for at reducere trykket på ganen eller tandkødet.

- 3 Vikl først 1/2" (12,5 mm) hvid tape eller stoftape helt rundt om NeoBar-platformen, og fortsæt derefter med tape omkring både platformen og ET-slangen.

Fjernelse

- 1 Udskift NeoBar hver 5. dag eller i henhold til hospitalsprotokol, alt efter hvad der kommer først.

- 2 Løsn tapen ud for at adskille ET-slangen fra NeoBar-platformen.
- 3 Gennemvæd fligene med vand eller saltvand.
- 4 Træk langsomt de klæbende hydrokolloidflige væk fra huden, mens du vasker med vand eller saltvand.

KONTRAINDIKATIONER, FORHOLDSREGLER

& ADVARSLER

NeoBar er kontraindiceret til patienter med inficerede eller ekskorierede hudområder, som ville forhindre korrekt placering af fligene.

Den er ikke beregnet til brug på voksne.

Føderal lovgivning begrænser denne enhed til salg af eller efter ordre fra en læge.

NeoBar bør kun anvendes, mens patienten er under konstant direkte opsyn af uddannet sundhedspersonale.

Afbryd straks brugen, hvis der opstår hudirritation.

NeoBar bør ikke komme i kontakt med læberne.

De klæbende hydrokolloidflige vil ikke klæbe ordentligt på fugtig hud eller hår. Olier og lotioner vil påvirke vedhæftningen negativt.

Brug ikke alkohol til at rense huden før påføring.

Kun til brug for en enkelt patient.