

# NeoHug<sup>®</sup>

## HOLDER TIL HJÆLPEVÆRKTØJ



### FUNKTIONER OG FORDELE

- Design med legende chimpanse eller smiley og fås i fem klare farver
- Bøjelige arme til at holde en række lette genstande
- Ideel til at holde sut, sugespids, tape og mere
- Tre fastgørelsesmuligheder
- C-klips:
  - Fastgøres til 3/4" (19mm)-delen på IV-stangen
  - Klikkes på og af
  - Ribbet design for at minimere, at enheden glider
  - Kan flyttes gentagne gange uden klæbemiddelrester
- Sugekop:
  - Kan fastgøres til de fleste glatte overflader
  - Stor sugekop for stærkt greb og nem fjernelse
  - Sidder fast selv ved varme og fugtighed
  - Kan flyttes gentagne gange uden klæbemiddelrester
- Ikke fremstillet med naturgummilatex eller blødgøringsmidlet DEHP
- Individuelt emballeret

Antal	Punkt	Antal/Enhed
N680A-C	Assorteret chimpanse C-klips	25/boks
N680A-S	Assorteret chimpansesugning	25/boks
N681A-C	Assorteret smile C-klips	25/boks
N681A-S	Assorteret smilesugning	25/boks

Assorteret = 5 af hver farve

Amerikansk patent #9,174,026; #D941,782



Kliniker opfundet

# NeoHug®

## HOLDER TIL HJÆLPEVÆRKTØJ

### INDIKATIONER FOR BRUG

NeoHug er beregnet til støtte, organisering eller til at holde medicinudstyr, som ikke er i brug.

### BRUGSANVISNING

**1** Fjern NeoHug fra pakke og affaldspose.

**2a (C-klips)** Sæt NeoHug på IV-stangen ved at trykke midt på C-klipsen, indtil den klikker på plads.

**2b (Sugekop)** Sæt NeoHug på ved at trykke på midten af sugekoppen fast mod glat, flad overflade.

*Bemærk: Hvis den monteres under meget fugtige forhold (fx inden i kuvøser), aftørres overfladen for overskydende fugt før montering.*

**3** Bøj og tilpas armene efter behov for at holde på ønskede genstande.





**4** Rens i henhold til hospitalets protokol. Brug en ny NeoHug til hver patient.

### Fjernelse

**1a (C-klips)** Hold fast på C-klipsen, og træk for at glide af. Træk ikke på NeoHug.

**1b (Sugekop)** Løft sugekop-klappen for at få den af overfladen.

*Forholdsregler: Erstat med det samme, hvis den er skadet, ELLER hvis C-klipsen eller sugekoppen ikke længere holder ordentligt fast.*

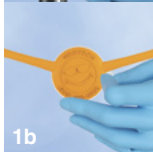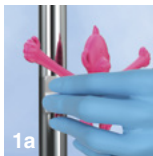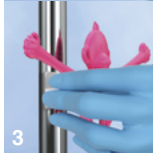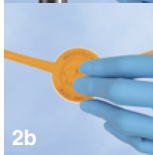

### FORHOLDSREGLER

Sugekoppen skal holdes ren og fri for snavs og væsker.

Erstat den med det samme, hvis den er skadet.

Erstat, hvis C-klipsen eller sugekoppen ikke længere holder ordentligt fast.

Tving ikke C-klipsen på stænger længere end 3/4" i diameter.

Kun til brug for en enkelt patient.